




Fodudløser sædehøjde/ Fotutløser for setehøjde/ Fotreglage för sitshöjd/ Foot release seat height - VELA Samba

Montering af fodudløser VELA Samba

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)926645 Fodudløsering inkl. 200mm gas, sædehøjde 44-64 cm

(A)926646 Fodudløsering inkl. 260mm gas, sædehøjde 55-81 cm

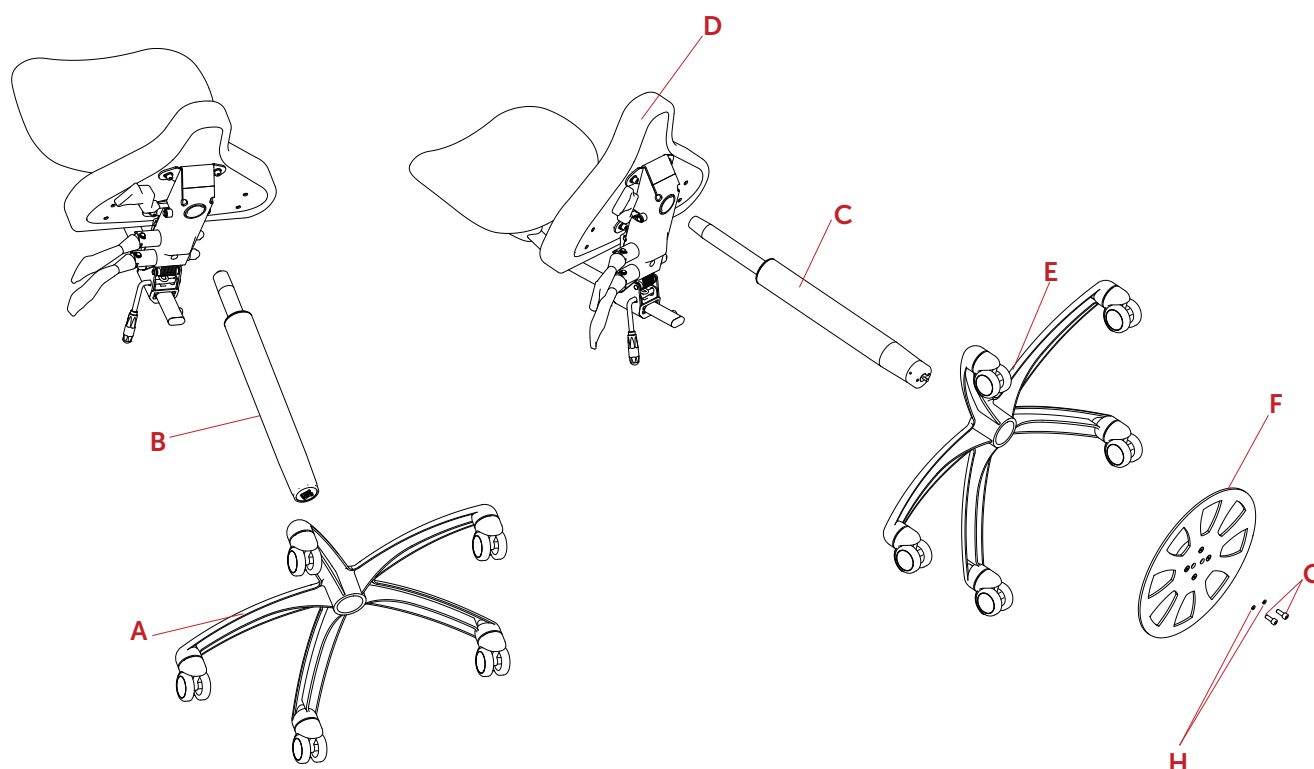

DANSK

1. Afmonter understel (A) og gaspatron (B) med gummihammer.
2. Monter den nye gaspatron (C) i overparten (D) og slå den forsigtigt fast med gummihammer.
3. Sæt understel (E) på gaspatronen (C), og slå den forsigtigt fast med gummihammer.
4. Skru fodudløser (F) fast på gaspatronen med de medsendte skruer (G) og O-ringe (H).
5. Fodudløseren er nu klar til brug.



Fodudløser sædehøjde/ Fotutløser for setehøjde/ Fotreglage för sitshöjd/ Foot release seat height - VELA Samba

VELA Samba

NORSK

1. Demonter understellet (A) og gasspatronen (B) med en gummihammer.
2. Monter den nye gasspatronen (C) i overdelen (D), og slå den forsiktig fast med en gummihammer.
3. Sett understellet (E) på gasspatronen (C), og slå den forsiktig fast med en gummihammer.
4. Skru fotutløseren (F) til gasspatronen med de medfølgende skruene (G) og O-ringene (H).
5. Fotutløseren er nå klar til bruk.

SVENSKA

1. Demontera underredet (A) och gaspatronen (B) med gummihammare.
2. Montera den nya gaspatronen (C) i ovdelen (D) och knacka den försiktigt på plats med gummihammare.
3. Sätt underredet (A) på gaspatronen (C) och knacka den försiktigt på plats med gummihammare.
4. Skruva fast fotspärren (F) på gaspatronen med de medföljande skruvarna (G) och O-ringarna (H).
5. Fotutlösaren är nu redo att användas.

ENGLISH

1. Use a rubber mallet to remove the underframe (A) and gas cartridge (B).
2. Insert the new gas cartridge (C) in the top piece (D) and gently hit it into place with the rubber mallet.
3. Set the underframe (E) on the gas cartridge (C), and gently hit it into place with the rubber mallet.
4. Screw the foot release (F) to the gas cartridge with the supplied screws (G) and O-rings (H).
5. The foot release is now ready for use.