





Intervalregulering/ Intervallregulering/ Intervallreglering/ Interval adjustment - VELA Tango El

Intervalregulering på VELA Tango med El



Videoinstruktion:
v1935.dk/105929

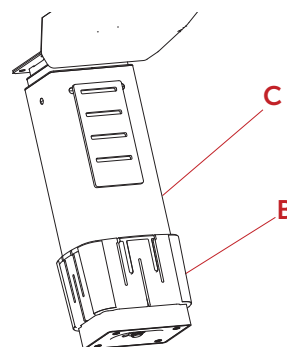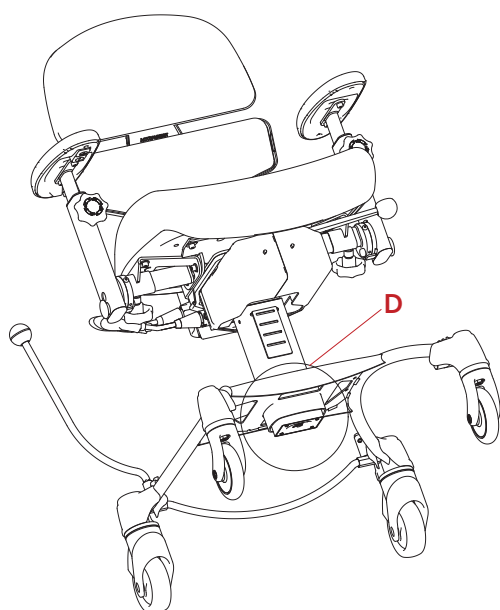

DANSK

1. Brug aftrækkerværktøjet (A) til at fjerne stellet – se hvordan værktøjet bruges i instruktionsvideo (QR-kode)
2. Fjern stellet og sæt plastbøsningen (B) i rillen på el-liften (C) i den ønskede højde.
3. Sørg for at plastbøsningen (B) stadig sidder godt fast i rillen på El-liften (C), så den ikke glider ud af rillen, når stellet placeres igen.
4. Placer stellet og sæt et knæ på sædet, for at presse overdelen helt på plads. Bøsningen skal flugte overkanten af stellet (D).

Aftrækkerværktøj SKAL bruges, da el-liften ikke holder til slag eller stød!



Intervalregulering/ Intervallregulering/ Intervallreglering/ Interval adjustment - VELA Tango El

Intervalregulering på VELA Tango med El

NORSK

1. Bruk avtrekkerverktøyet (A) for å fjerne understellet. Se hvordan verktøyet brukes ved å bruke QR-koden.
2. Ta av understellet og fest plasthylsen (B) inn i sporet på løftmotoren (C) i ønsket høyde.
3. Sørg for at plastfôringen (B) fortsatt sitter godt fast i rillen på løftmotoren (C), siden den bestemmer høyden.
4. Plasser løftmotoren i det nye understellet, og sett overdelen/sitteenheten på plass igjen. Sett et kne på setet for å presse overdelen helt på plass. Hylsen må flukte toppen av understellet (D).

Avtrekkerverktøy SKAL brukes, løftmotoren tåler ikke slag eller støt!

SVENSKA

1. Använda avdragarverktyget (A) för att ta bort det gamla underredet. Du kan få information om hur verktyget används via QR-koden ovanför.
2. Ta bort underredet och sätt i plastbussningen (B) i spåret på lyftmotorn (C) i den önskade sitthöjden.
3. Se till att plastbussningen (B) fortfarande sitter ordentligt fast i spåret på lyftmotorn (C) eftersom det är den som avgör sitshöjden.
4. Placera lyftmotorn i det nya underredet och sätt den övre delen/sitsen på plats igen. Sätt ett knä mot sitsen för att pressa den övre delen ordentligt på plats. Bussningen måste följa toppen av underredet (D).

Avdragarverktyget MÅSTE användas eftersom lyftmotoren inte tål slag och stötar!

ENGLISH

1. Use the special tool (A) to remove the frame. You can see how to use the tool by using the QR code above.
2. Remove the frame and fit the plastic bushing (B) into the groove of the electric lift (C) at the desired height.
3. Ensure that the plastic bushing (B) is securely in place in the groove of the electrical lift (C), as this determines the height.
4. Position the frame and set the top piece in place once again. Place a knee on the seat to push the top piece fully in place. The bushing should be at level with the upper edge of the frame (D).

The special tool MUST be used because the electric lift cannot withstand shocks or bumps.