




VELA Latin


VARIANT:

100/200/300


Manual nr. 105376

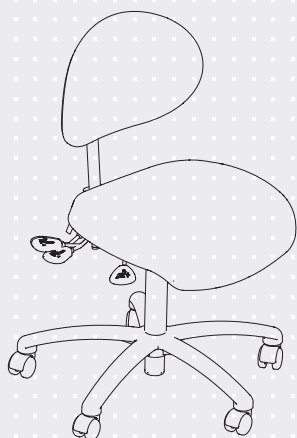

VELA Latin 100

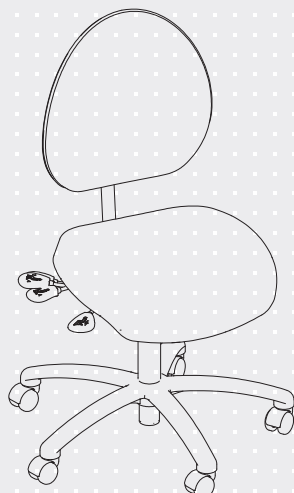

VELA Latin 200

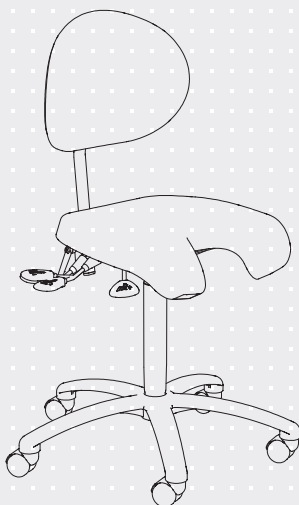

VELA Latin 300

ISO 9001
ISO 14001*Stolens design varierer avhengig av modell*

STOLENS FUNKSJONER



vela.my/no-latin-grep

* Avhengig av modell

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	4
1.1. ADVARSLER	5
1.2. FEILSØKING	5
1.3. MERKING SOM BRUKES PÅ STOLEN	6
1.4. EU-SAMSVAR	6
1.4.1. Beregnet bruk	6
1.4.2. Transport	6
1.5. REKLAMASJONSRETT	6
1.6. UTPAKKING AV STOLEN	7
1.7. VEDLIKEHOLD	7
1.7.1. Hjul	7
1.7.2. Rengjøring	7
1.7.3. Polstringsoverflater	7
1.7.4. Gjenbrukshjelpemiddel	7
1.8. GJENBRUK OG GJENVINNING	8
1.8.1. Materialfordeling	8
1.9. BRUKERMANUAL	10
1.9.1. Påsetting av ryggstøtte	10
1.9.2. Høydeinnstilling med fotbetjening	10
1.9.3. Høydeinnstilling med spak	10
1.9.4. Innstilling av setevinkel	10
1.9.5. Innstilling av rygghøyde	11
1.9.6. Innstilling av ryggvinkel	11
1.9.7. Rygg-Regulering*	11
1.9.8. Innstilling av Armlene*	11
1.9.9. Fotring*	12
1.9.10. Armlene for prøvesamling*	12

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Lykke til med din nye VELA/VELA Medical-stol. Vi er sikre på at denne stolen vil være til daglig glede for deg.

Denne brukermanualen gir nyttige opplysninger om justering, betjening og vedlikehold.

Viktig

Vennligst les denne brukermanualen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge stolen. Brukermanualen kan også finnes på www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.com, hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon om våre stoler.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør/VELA-medical forhandler.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Vermund Larsen Norge AS/VELA Medical

Solgaard Skog 4

1599 Moss

Norge

www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.com

1.1. ADVARSLER



Bruk	Ved allergisk reaksjon, opphør bruk av stolen og konsulter med legen din
Bruk	Bruk kun originale VELA/VELA Medical-reservedeler
Bruk	Gjør ikke endringer på tilbehøret som følger med stolen
Bruk	Bruk kun stolen til det tiltenkte formålet
Bruk	Juster kun sete- og ryggvinkel mens brukeren sitter i stolen med føttene i kontakt med gulvet.
Bruk	Bruk aldri stolen på overflater med nivåforskjeller, da det kan oppstå risiko for at stolen blir ustabil
Bruk	Service utover vanlig rengjøring bør alltid utføres av en fagperson
Bruk	Utfør aldri service på stolen mens den er i bruk
Bruk	Følg alltid anbefalingene for vedlikehold og rengjøring
Bruk	Stolens funksjoner er tiltenkt stolens bruker. Kun brukeren eller fagpersonale med opplæring bør justere stolen mens brukeren sitter i den
Bruk	Det kan oppstå klemfare ved bevegelige deler. Bruk derfor aldri stolen hvis brukeren eller andre holder under setet og nedenfor
Kvelningsfare	Kvelningsfare ved små deler. La aldri små barn leke med stolen, da små deler kan tas av


1.2. FEILSØKING

Feil	Mulig årsak og løsning
Høydejustering med gasspatron fungerer ikke	Der er for stor belastning eller ujevn belastning på stolen. Prøv å justere høyden, uten at du sitter i stolen. Hvis dette ikke fungerer er gasspatronen defekt og bør byttes ut. Kontakt din VELA/VELA Medical-leverandør
Armlene virker løs	Håndskruen er løs enten i bredde- eller høydejustering. Stram håndskruen
Stolen ruller ikke godt	Hjul er blokkert. Rens hjulene for trådrester o.l.
Ryggbøyle glir ned	Stram skruen ytterligere som vist i punkt 1.9.1. Skruen kan strammes hardt til uten å skade produktet

Hvis de ovenstående løsningene ikke løser ditt problem, bør du kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør.

GENERELT

1.3. MERKING SOM BRUKES PÅ STOLEN

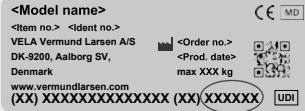Advarsel	Klemfare: Hold hender og fingre borte fra bevegelige deler	
Etikett	60 x 22,5 mm	

Merking på stolen bør kunne leses fra ca. 40 cm avstand i normalt dagslys. For merking relatert til betjening henvises det til avsnitt 1.9.

1.4. EU-SAMSVAR

Dette produktet er CE-merket medisinsk utstyr (klasse I i henhold til vedlegg VIII) i samsvar med MDR (EU) 2017/745.

All emballasje til produktet er i samsvar med PPWR 2025/40.

Produsenten, VELA - Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 8-12, DK-9200 Aalborg SV, Danmark, er ansvarlig for produktet, emballasjen og de tilhørende samsvarserklæringene.

1.4.1. BEREGNET BRUK

Denne stolen er beregnet til å støtte brukeren i sittende stilling, mens brukeren utfører innendørs daglige aktiviteter, herunder arbeidsaktiviteter.

:: Stolen er ikke laget for å stå på

Alle varianter av denne stolen er testet og godkjent for en maksimal belastning på 125 kg. For optimal

bruk er stolens anbefalte brukervekt 40-110 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport av stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man alltid bruke stolens brems. Stolen er ikke godkent som passasjer sete i transportmidler og må derfor ikke brukes som det.

Stolen kan klare følgende transportspesifikasjoner:

Temperatur: - 20°C til + 60°C

Luftfuktighet: 15-95%

La stolen stå i 24 timer før den tas i bruk hvis den har vært oppbevart i lave temperaturer enn - 10°C.

1.5. REKLAMASJONSRETT

VELA/VELA Medical gir reklamasjonsrett etter gjeldende lovgivning i det landet hvor stolen er levert.

Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger utført av

fagpersoner.

VELA/VELA Medical påtar seg ikke ansvar for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.:

- :: Transport
- :: Misbruk
- :: Vanlig slitasje
- :: Feilbruk
- :: Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
- :: Tilpasninger gjennomført av uautoriserede personer

1.6. UTPAKKING AV STOLEN

Stolen leveres i miljøvennlig og gjenbruksegnet emballasje.

Dersom det er mangler eller transportskade på stolen, bes du straks kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør. I slike tilfeller må du ikke forsøke å reparere eventuelle skader selv eller ta stolen i bruk.

Ved levering mottar du:

- :: VELA/VELA Medical-stol
- :: Brukermanual for stolen

Se pkt.1.9.1. for påsetting av ryggstøtte

1.7. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlig ettersyn av stolen for å finne frem til eksempelvis

defekte og slitte deler. VELA garanterer 5 års tilgang til reservedeler for slitedeler fra kjøpstidspunktet. Man bør selv stramme alle justerbare deler regelmessig. På www.vermund-larsen.no/www.vela-medical.com finnes diverse veiledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales å kontrollere hjul og rengjøre for eventuelle trådrester o.l. med jevne mellomrom. Visse gulvtyper samler opp skitt på hjulbanene. Rens derfor hjulbanene etter behov.

1.7.2. RENGJØRING

Rengjøres med lunkent vann som evt. er tilsatt en pH-neutral såpe.

1.7.3. POLSTRINGSOVERFLATER

Stoff: Rengjøres ved kjemisk rens, med møbelrens eller en godt vridd klut med vann.

Merk: Ulltekstiler inneholder permeatrinn for beskyttelse mot skadedyr.

Kunststoff/kunstskinn: Rengjøres med en godt vridd klut med vann eller mild såpe.

Skin: Rengjøres med støvsuging med myk børste. Unngå bruk av rengjøringsmiddel.

Medisinske tekstiler: Rengjøres som ovenfor. Desinfeksjonsmiddel og teknisk sprit kan også brukes. For å se hvilke spesifikke konsentrasjoner forskjellige typer trekk kan håndtere, se www.vela-medical.com

Merk: På www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.com kan du finne rengjøringsveiledninger for alle våre standard polstringsyper.

1.7.4. GJENBRUKSHJELPEMIDDEL

Din VELA/VELA Medical-stol kan gjenbrukes når du ikke lenger har bruk for den, hvis den får service av en tekniker først.

Den forventede levetiden for stolen er 5 år ved normal og korrekt bruk. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller fagpersonale med opplæring utfører årlige ettersyn med evt. bytting av slidedeler.


1.8. GJENBRUK OG GJENVINNING

Dette produktet inneholder materialer som kan gjenbrukes. Derfor skal produktet gjenvinnes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt bortskaffelse og gjenbruk bidrar til å forhindre negativ påvirkning på miljø og mennesker.

1.8.1. MATERIALFORDELING

Materialfordelingen for VELA Latin-stoler er som følger:


Materialtyper	Sum av vekt (i %)
Metall	61,2%
Diverse	0,2%
Syntetisk	6,3%
Tekstil	2,9%
Polstring	8,1%
Tre*	21,5%
Hovedtotal	100,0%

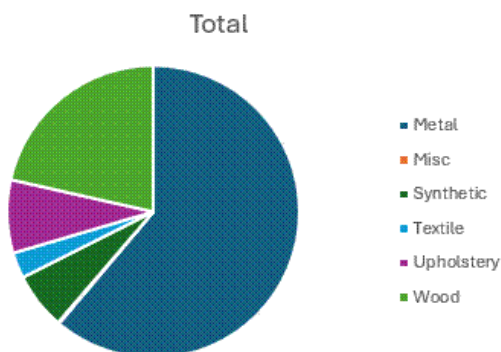

*Bøk og blandet bartre. Opprinnelse: Tyskland, Ungarn og Frankrike.

1.9. BRUKERMANUAL


Utsifting av gassfjær og elektrisk heis skal kun utføres av tekniker fra VELA/VELA Medical eller av person med opplæring innenfor dette feltet.

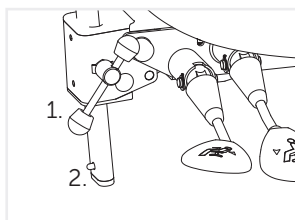

1.9.1. PÅSETTING AV RYGGSTØTTE


Grep (1) til innstilling av rygg settes i åpen posisjon. Låsetapp (2) på ryggbøyle trykkes inn, ryggen sættes ned igjennom plasthylsen, stram håndskruen igjen.

Merk: Sjekk at låsetappen er ute, og ryggen ikke kan trekkes opp uten å trykke inn låsetappen.

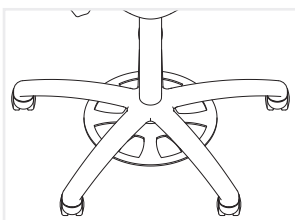

1.9.2. HØYDEINNSTILLING MED FOTBETJENING

Innstillles ved å trå på ringen som er på understellet.

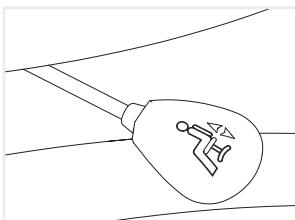

1.9.3. HØYDEINNSTILLING MED SPAK


Innstillles ved å trekke opp den fremste spak på høyre side.



1.9.4. INNSTILLING AV SETEVINKEL

Innstillles ved å trekke opp midterste spak på høyre side.


Merk: Innstilling av ryggvinkel og setevinkel skal alltid skje med føttene hvilende på gulv.

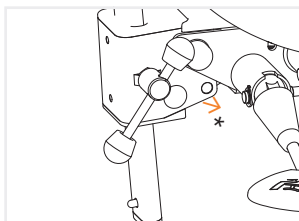

1.9.5. INNSTILLING AV RYGGHØYDE


Stilles inn ved å løsne skruen på ryggfestet og regulere høyden. Husk å stramme skruen igjen.

* Ved behov for å stramme skruen ytterligere trekkes grepet ut (bort fra skruen), og grepet kan dreies uten å løsne skruen. Når grepet slippes, griper det tak i skruen igjen, og det kan strammes ytterligere.

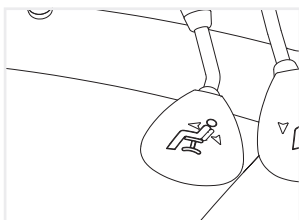


1.9.6. INNSTILLING AV RYGGVINKEL

Innstilles ved å trekke opp den bakerste spak på høyre side. Betjen kun håndtaket, når noen sitter i stolen, da stolryggen vipper forover.

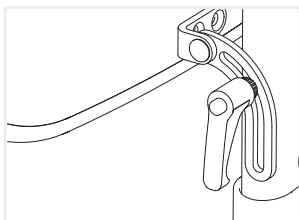


1.9.7. RYGG-REGULERING*

Ryggen kan låses i ønsket vinkel ved å stramme håndtaket bak på ryggen.

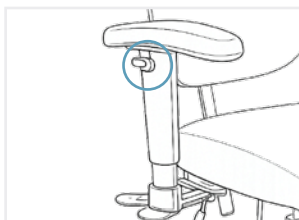


1.9.8. INNSTILLING AV ARMLENE*

K1-armlene med 5 trinns høydejustering kan innstilles til å peke innover, utover eller rett frem. K1 er lett å justere i høyden ved å bruke knapp under armlenet.

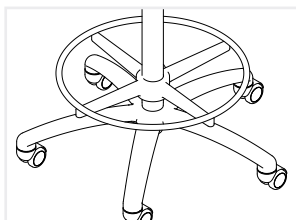

1.9.9. FOTRING*

Fotring (Ø 45 cm) kan høydeinnstilles og gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt og trenger stabilitet.

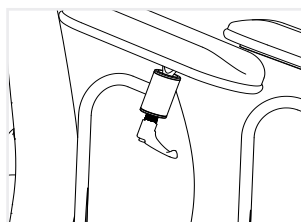

1.9.10. ARMLENE FOR PRØVESAMLING*

Armlenet justeres ved å løsne skruen under puten og regulere vinkelen på armlenet. Husk å stramme skruen etterpå.

** Avhengig av modell*