





VELA Samba

VARIANT: 400/410/420/500/520/530


Manual nr. 105562

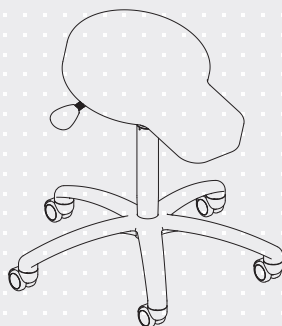


VELA Samba 530

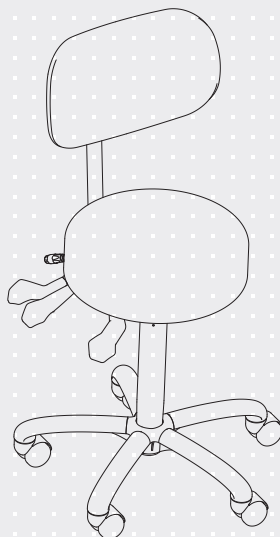


VELA Samba 520

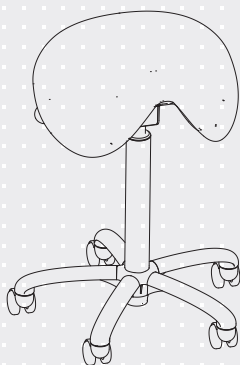

VELA Samba 400

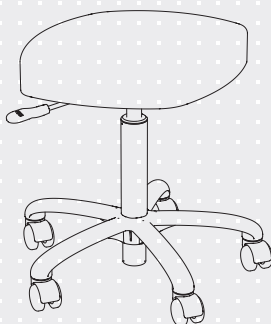

VELA Samba 410

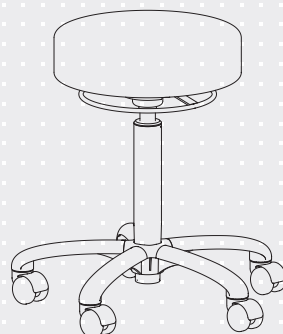

VELA Samba 500

ISO 9001
ISO 14001*Stolens design varierer avhengig av modell*

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEILSØKING	5
1.3. MERKING SOM BRUKES PÅ STOLEN	6
1.4. SIKKERHET	7
1.4.1. Beregnet bruk	7
1.4.2. Transport	7
1.5. REKLAMASJONSRETT	7
1.6. UTPAKKING AV STOLEN	7
1.7. VEDLIKEHOLD	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Rengjøring	8
1.7.3. Polstringsoverflater	8
1.7.4. Gjenbrukshjelpemiddel	8
1.8. GJENBRUK OG GJENVINNING	8
1.9. BRUKERMANUAL	9
1.9.1. Påsetting av ryggstøtte*	9
1.9.2. Høydeinnstilling med ring*	9
1.9.3. Høydeinnstilling med fotbetjening*	9
1.9.4. Høydeinnstilling med spak*	9
1.9.5. Høydeinnstilling med spak (VELA Samba 400 & 530)	10
1.9.6. Innstilling av setevinkel (VELA Samba 420 & 520)	10
1.9.7. Innstilling av setevinkel (VELA Samba 400 & 530)	10
1.9.8. Innstilling av rygghøyde (VELA Samba 420 & 520)	10
1.9.9. Innstilling av ryggvinkel (VELA Samba 420 & 520)	11
1.9.10. Høydeinnstilling med spak (VELA Samba 410)	11
1.9.11. Innstilling av armlene, høyde*	11
1.9.12. Innstilling av armlene, bredde*	11
1.9.13. Fotring*	12

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Lykke til med din nye VELA/VELA Medical-stol. Vi er sikre på at denne stolen vil være til daglig glede for deg.

Denne brukermanualen gir nyttige opplysninger om justering, betjening og vedlikehold.

Viktig

Vennligst les denne brukermanualen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge stolen. Brukermanualen kan også finnes på www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.dk, hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon om våre stoler.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør/VELA-medical forhandler.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela-medical.dk

1.1. ADVARSLER



Bruk	Ved allergisk reaksjon, opphør bruk av stolen og konsulter med legen din
Bruk	Bruk kun originale VELA/VELA Medical-reservedeler
Bruk	Gjør ikke endringer på tilbehøret som følger med stolen
Bruk	Bruk kun stolen til det tiltenkte formålet
Bruk	Juster kun sete- og ryggvinkel mens brukeren sitter i stolen med føttene i kontakt med gulvet.
Bruk	Bruk aldri stolen på overflater med nivåforskjeller, da det kan oppstå risiko for at stolen blir ustabil
Bruk	Service utover vanlig rengjøring bør alltid utføres av en fagperson
Bruk	Utfør aldri service på stolen mens den er i bruk
Bruk	Følg alltid anbefalingene for vedlikehold og rengjøring
Bruk	Stolens funksjoner er tiltenkt stolens bruker. Kun brukeren eller fagpersonale med opplæring bør justere stolen mens brukeren sitter i den
Bruk	Det kan oppstå klemfare ved bevegelige deler. Bruk derfor aldri stolen hvis brukeren eller andre holder under setet og nedenfor
Kvelningsfare	Kvelningsfare ved små deler. La aldri små barn leke med stolen, da små deler kan tas av

1.2. FEILSØKING

Feil	Mulig årsak og løsning
Høydejustering med gasspatron fungerer ikke	Der er for stor belastning eller ujevn belastning på stolen. Prøv å justere høyden, uten at du sitter i stolen. Hvis dette ikke fungerer er gasspatronen defekt og bør byttes ut. Kontakt din VELA/VELA Medical-leverandør
Stolen ruller ikke godt	Hjul er blokkert. Rens hjulene for trådrester o.l.
Ryggbøyle glir ned	Stram skruen ytterligere som vist i punkt 1.9.1. Skruen kan strammes hardt til uten å skade produktet

Hvis de ovenstående løsningene ikke løser ditt problem, bør du kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør.

GENERELT

1.3. MERKING SOM BRUKES PÅ STOLEN

Advarsel	Klemfare: Hold hender og fingre borte fra bevegelige deler	
Etikett	60 x 22,5 mm	<Model name> <Item no.> <Ident no.> VELA Vermund Larsen A/S DK-9200, Aalborg SV, Denmark www.vermundlarsen.com (XX) XXXXXXXXXXXXXX (XX) XXXXXX CE MD <Order no.> <Prod. date> max XXX kg UDI De siste seks sifre er produktets id-nummer:

Merking på stolen bør kunne leses fra ca. 40 cm avstand i normalt dagslys.
For merking relatert til betjening henvises det til avsnitt 1.9.

1.4. SIKKERHET

Denne stolen er CE-merket og overholder gjeldende EU-regler.

Stolen er produsert av:
VELA/VELA Medical, Gøteborgvej
8-12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. BEREGNET BRUK

Denne stolen er beregnet til å støtte brukeren i sittende stilling, mens brukeren utfører innendørs daglige aktiviteter, herunder arbeidsaktiviteter.

- :: Stolen er ikke laget for å stå på
- :: Stolen skal alltid bremses når man setter seg eller reiser seg.

Alle varianter av denne stolen er testet og godkjent for en maksimal belastning på 120 kg. For optimal bruk er stolens anbefalte brukervekt 40-110 kg.

Advarsel: VELA Samba 410 er testet og godkjent for en maksimal belastning på 95kg. For optimal bruk er stolens anbefalte brukervekt 40-80 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport av stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man alltid bruke stolens brems. Stolen er ikke godkent som passasjersele i transportmidler og må derfor ikke brukes som det.

Stolen kan klare følgende transportspesifikasjoner:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

La stolen stå i 24 timer før den tas i bruk hvis den har vært oppbevart i lavere temperaturer enn - 10°C.

1.5. REKLAMASJONSRETT

VELA/VELA Medical gir reklamasjonsrett etter gjeldende lovgivning i det landet hvor stolen er levert. Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger utført av fagpersoner.

VELA/VELA Medical påtar seg ikke ansvar for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.:

- :: Transport
- :: Misbruk
- :: Vanlig slitasje
- :: Feilbruk
- :: Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
- :: Tilpasninger gjennomført av uautoriserte personer

1.6. UTPAKKING AV STOLEN

Stolen leveres i miljøvennlig og gjenbruksegnet emballasje.

Dersom det er mangler eller transportskade på stolen, bes du straks kontakte din VELA/VELA Medical-leverandør. I slike tilfeller må du ikke forsøke å reparere eventuelle skader selv eller ta stolen i bruk.

Ved levering mottar du:

:: VELA/VELA Medical-stol

:: Brukermanual for stolen

Merk: se punkt 1.9.1. for korrekt montering av ryggstøtte.

1.7. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlig ettersyn av stolen for å finne frem til eksempelvis defekte og slitte deler. Man bør selv stramme alle justerbare deler regelmessig. På www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.dk finnes diverse veiledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales å kontrollere hjul og rengjøre for eventuelle trådrester o.l. med jevne mellomrom.

Visse gulvtypen samler opp skitt på hjulbanene. Rens derfor hjulbanene etter behov.

1.7.2. RENGJØRING

Rengjøres med lunkent vann som evt. er tilsatt en pH-neutral såpe.

1.7.3. POLSTRINGSOVERFLATER

Stoff: Rengjøres ved kjemisk rens, med møbelrens eller en godt vridd klut med vann.

Kunststoff/kunstskinn: Rengjøres med en godt vridd klut med vann eller mild såpe.

Skin: Rengjøres med støvsugning med myk børste. Unngå bruk av rengjøringsmiddel.

Medisinske tekstiler: Rengjøres som ovenfor. Desinfeksjonsmiddel og teknisk sprit kan også brukes. For å se hvilke spesifikke konsentrasjoner forskjellige typer trekk kan håndtere, se www.vela-medical.dk

Merk: På www.vermundlarsen.no/www.vela-medical.dk kan du finne rengjøringsveiledninger for alle våre standard polstringsyper.

1.7.4. GJENBRUKSHJELPEMIDDEL

Din VELA/VELA Medical-stol kan gjenbrukes når du ikke lenger har bruk for den, hvis den får service av en tekniker først.


Den forventede levetiden for stolen er 5 år ved normal og korrekt bruk. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller fagpersonale med opplæring utfører årlige ettersyn med evt. bytting av slidedeler.

1.8. GJENBRUK OG GJENVINNING

Dette produktet inneholder materialer som kan gjenbrukes. Derfor skal produktet gjenvinnes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt bortskaffelse og gjenbruk bidrar til å forhindre negativ påvirkning på miljø og mennesker.

1.9. BRUKERMANUAL


Udskiftning af gasfjeder må kun ske af en tekniker fra VELA/VELA Medical eller af en uddannet person indenfor dette felt.

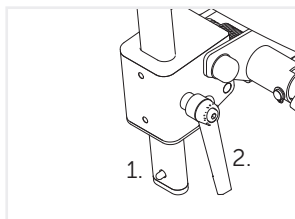

1.9.1. PÅSETTING AV RYGGSTØTTE*


Grep (1) til innstilling av rygg settes i åpen posisjon. Låsetapp (2) på ryggbøyle trykkes inn, ryggen sættes ned igjennom plasthylsen, stram håndskruen igjen.

Merk: Sjekk at låsetappen er ute, og ryggen ikke kan trekkes opp uten å trykke inn låsetappen.

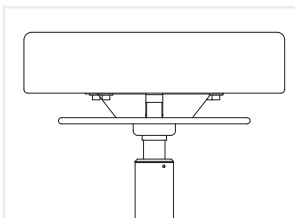


1.9.2. HØYDEINNSTILLING MED RING*

Innstilles ved å trekke opp den runde ringen som er under setet.

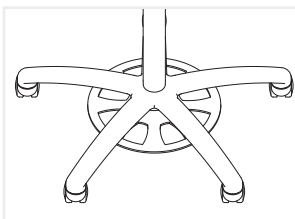

1.9.3. HØYDEINNSTILLING MED FOTBETJENING*


Innstilles ved å trå på ringen som er på understellet.

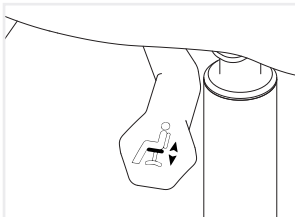

1.9.4. HØYDEINNSTILLING MED SPAK*


Innstilles ved å trekke opp den fremste spak på høyre side.

* Avhengig av modell

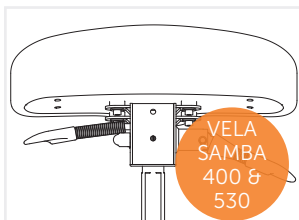


1.9.5. HØYDEINNSTILLING MED SPAK (VELA SAMBA 400 & 530)

Innstilles ved å trekke opp spak på venstre side.

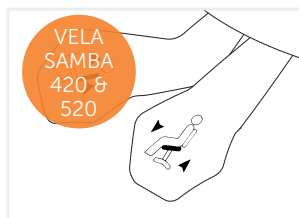


1.9.6. INNSTILLING AV SETEVINKEL (VELA SAMBA 420 & 520)

Innstilles ved å trekke opp midterste spak på høyre side.

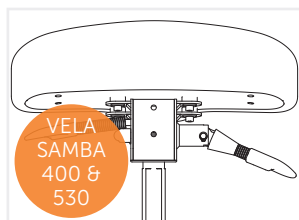

1.9.7. INNSTILLING AV SETEVINKEL (VELA SAMBA 400 & 530)

Innstilles ved å trekke opp spak på høyre side.

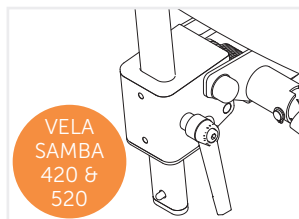

1.9.8. INNSTILLING AV RYGGHØYDE (VELA SAMBA 420 & 520)


Løsne grepet som er bak på ryggen. Innstill ryggen. Husk å stramme grepet etterpå.

Merk: Innstilling av ryggvinkel og setevinkel skal alltid skje med føttene hvilende på gulv.




1.9.9. INNSTILLING AV RYGGVINKEL (VELA SAMBA 420 & 520)

Innstilles ved å trekke opp den bakerste spak på høyre side. Betjen kun håndtaket, når noen sitter i stolen, da stolryggen vipper forover.

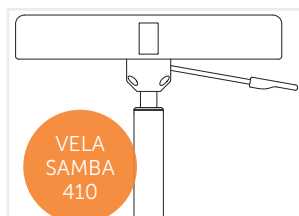

1.9.10. HØYDEINNSTILLING MED SPAK (VELA SAMBA 410)


Innstilles ved å trekke opp spak på høyre side.

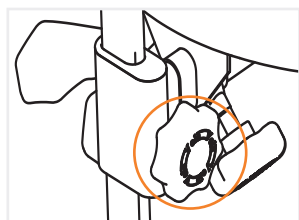

1.9.11. INNSTILLING AV ARMLENE, HØYDE*

Stilles inn ved å løsne håndskruen på armlenestangen og regulere høyden på armlenet. Husk å stramme håndskruen igjen.

Merk: Armlenet kan fjernes helt ved å løsne armleneskruen og trekke opp armlene.

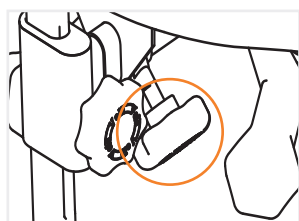


1.9.12. INNSTILLING AV ARMLENE, BREDDE*

Stilles inn ved å løsne skruen under setet og regulere bredden på armlenene ved å trekke armlenet utover. Husk å stramme skruen igjen.

Merk: Armlenene kan fjernes helt ved å skyve på låsetappen som ligger i bunnen av stangen og trekke ut armlenet når håndskruen løsnes

** Avhengig av modell*

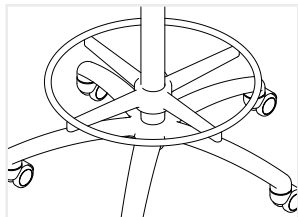

1.9.13. FOTRING*

Fotring (Ø 45 cm) kan høydeinnstilles og gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt og trenger stabilitet.

** Avhengig av modell*