




VELA Meywalk 4

Manual. nr. 106101

Art.nr.:	Model
MS014000	Micro
MS013000	Small
MS011200	Medium
MS011250	Large

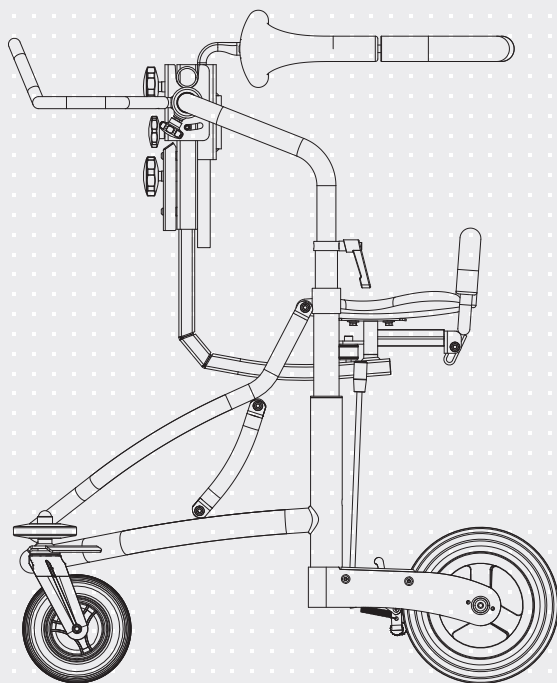

ISO 9001
ISO 14001

Design varierer avhengig av modell

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEILSØKING	5
1.3. MERKER SOM BRUKES PÅ GÅSTOLEN	6
1.4. SIKKERHET	7
1.4.1. Beregnet bruk	7
1.4.2. Transport	7
1.5. REKLAMASJONSRETT	7
1.6. UTPAKKING AV GÅSTOLEN	8
1.7. VEDLIKEHOLD	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Stell	8
1.7.3. Polstrede overflater	8
1.7.4. Genbrukshjelpemiddel	8
1.8. GJENBRUK OG AVHENDING	9
1.9. PRODUKTOVERBLIKK	9
2.0. BRUKERMANUAL	10
2.0.1. Montering av overdel og understell	10
2.0.2. Montering og utskifting av fjær	10
2.0.3. Montering og bytting av fjær (micro)	10
2.0.4. Høydejustering	10
2.0.5. Brems	11
2.0.6. Justering av setehøyde	11
2.0.7. Justering av høyden på kroppstøtting	11
2.0.8. Vippefunksjon	11
2.0.9. Kroppsstøtting	12
2.0.10. Inn- og utstigning	12
2.0.11. Justering av håndbøyle	12
2.0.12. Bruk av rumpestopper	12
2.0.13. Justering av rumpestopper	13
2.0.14. Slepebrems	13
2.0.15. Returløpssperre	13
2.0.16. Retningsstyrer	13

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Gratulerer med din nye VELA Meywalk 4. Vi er sikre på at denne gåstolen vil være til daglig glede for deg. Denne bruksanvisningen gir nyttig informasjon om justering, bruk og vedlikehold.

Viktig

Vennligst les denne bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge med gåstolen. Bruksanvisningen kan også finnes på www.vermundlarsen.no, hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

1.1. ADVARSLER




Bruk	Bruk kun originale reservedeler for VELA Meywalk.
Bruk	Gjør ikke endringer på tilbehøret som følger med gåstolen.
Bruk	Gåstolen er et hjelpemiddel og bør kun anvendes til det formålet.
Bruk	Kontroller at alle delene på gåstolen er riktig festet før den tas i bruk.
Bruk	Gåstolen må kun benyttes under oppsyn. Hjulene ruller svært lett, slik at det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene og eventuelle farer som brukeren kan møte på.
Bruk	Gåstolens brems skal alltid være på ved inn- og utstigning.
Bruk	Vippebøylen skal alltid heves og senkes med håndkraft - man bør ikke trække vippebøylen ned.
Bruk	På størrelsene: Small, Medium og Large er det en vippebøyle som hever og senker gåstolen ved inn- og utstigning. Slipp aldri vippebøylen når denne heves eller senkes. Vær forberedt på en oppadgående kraft som øker gradvis med at vippebøylen løftes. Slipp aldri vippebøylen midt under en heve- eller senkebevegelse da dette er til fare for bruker og hjelper.
Bruk	Gåstolen skal kun brukes på fast gulv. Unngå å bruke den på skrå, ujevne, løse, våte eller glatte overflater eller på overflater med nivåforskjeller, da dette kan medføre risiko for velt.
Bruk	Fjærsystemet kan gi risiko for velt hvis gåstolen brukes av en svært urolig bruker. VELA Meywalk 4 må ikke brukes uten fjær.
Bruk	Gåstolen skal aldri brukes under justering da det kan oppstå klemfare ved bevegelige deler.
Bruk	VELA Meywalk og dens tilbehør er designet for din sikkerhet. Hvis deler av utstyret fjernes kan dette føre til åpne rørkanter som kan være skarpe og påføre skade. Disse åpne rørkantene skal lukkes igjen med plastpropper - rør ikke åpne rørender med fingre eller andre deler av kroppen.
Bruk	Service utover vanlig rengjøring bør alltid utføres av en fagperson
Bruk	Utfør aldri service på gåstolen mens den er i bruk
Bruk	Følg alltid instruksene for vedlikehold og rengjøring
Bruk	Beskytt gåstolens polstrede overflater mot direkte sollys eller dekk til overflatene, da disse kan bli svært varme og stoffet kan skades.

1.2. FEILSØKING

Feil	Mulig årsak og løsning
Gåstolen kan ikke dreies	Retningsstyrer kan være aktivert. Se punkt 2.0.16.
Bremsen fungerer ikke	Bremsen er ikke aktivert. Se punkt 2.0.5.
Overdelen henger skeivt til den ene siden	Sjekk at begge fjærene er montert korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Overdelen sitter fast	Sjekk at begge fjærene er montert korrekt. Se punkt 2.0.2. eller 2.0.3.
Gåstolen ruller dårlig	Hjulet er blokkert. Rengjør hjulene for trådrester o.l. Slepebremsen kan være aktivert. Se punkt 2.0.14.
Gåstolen kan ikke gås baklengs	Returløpssperren kan være aktivert. Se punkt 2.0.15.
Håndbøylen er løs	Stram håndtakene
Setebøylen er løst	Stram håndtaket
Sitte- og gåhøyden er lavere enn før	Løsne italienergripen, flytt overdelen opp til ønsket høyde og stram italienergripen igjen. Se punkt 2.0.4.
Kroppstøtting og stigerør er løse	Stram håndtaket
Sittehøyden er lavere enn før	Vippebøylen kan være slått nedover. Se punkt 2.0.10.

Hvis det ovenstående ikke løser problemet ditt, kontakt din VELA-leverandør.

1.3. MERKER SOM BRUKES PÅ GÅSTOLEN

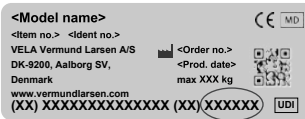Merke	60 x 22,5 mm	
-------	--------------	---

Merker på gåstolen bør kunne leses fra ca. 40 cm avstand i normalt dagslys.
For merker relatert til betjening henvises det til avsnitt 2.0.

GENERELT

1.4. SIKKERHET

Denne gåstolen er CE-merket og overholder gjeldende EU-regler. Gåstolen er produsert av: VELA, Gøteborgvej 8-12, DK-9200 Aalborg SV, Danmark

1.4.1. BEREGNET BRUK

Gangvogn til barn og voksne, som hjelper de med å reise seg og bevege seg på tross av at de har redusert eller ingen gangfunksjon.

- :: Gåstolen skal alltid bremses ved inn- og utstigning
- :: Gåstolen må kun brukes under oppsyn. Hjulene ruller svært lett, slik at det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene og eventuelle farer som brukeren kan støte på.

VELA Meywalk er testet og godkjent for følgende maksimale belastninger:

- :: VELA Meywalk 4 Micro: 60 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Small: 100 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Medium: 130 kg.
- :: VELA Meywalk 4 Large: 130 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport av gåstolen i bil, fly og andre transportmidler bør man alltid bruke gåstolens brems. Brukeren må ikke opholde seg i gåstolen under transport.

Gåstolen kan tåle følgende transportspesifikasjoner:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

1.5. REKLAMASJONSRETT

VELA gir reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lovgivning i landet hvor gåstolen er anskaffet. Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger utført av fagpersoner.

Merk: hvis det er inngått en særkontraktavtale direkte med VELA, er det denne som gjelder!

VELA påtar seg ikke ansvaret for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.:

- :: Transport
- :: Misbruk
- :: Vanlig slitasje
- :: Uriktig bruk
- :: Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
- :: Tilpasninger foretatt av uautoriserte personer

1.6. UTPAKKING AV GÅSTOLEN

Gåstolen leveres i miljøvennlig og gjenbruksegnet emballasje.

Dersom det er mangler eller transportskade på gåstolen, bes du straks kontakte din VELA-leverandør. Ved et slikt tilfelle må du ikke selv forsøke å reparere eventuelle skader eller ta gåstolen i bruk.

Ved levering har du mottatt:

- :: VELA Meywalk 4 gåstol
- :: Kroppsstøttering og fjærer til gåstolen. Disse er pakket i en separat eske sammen med monteringsveiledningen. **Merk:** Skal monteres på gåstolen før bruk!
- :: Bruksanvisning for gåstolen

1.7. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlige kontroll av gåstolen for å kunne oppdage eventuelle defekte og slitte deler. Man bør selv stramme alle justerbare deler regelmessig. Man finner diverse veiledninger på www.vermundlarsen.no.

1.7.1. HJUL

Det anbefales å kontrollere hjul og rengjøre for eventuelle trådrester o.l. med jevne mellomrom. Visse gulvtyper samler opp skitt på hjulbanene. Rens derfor hjulbanene etter behov.

1.7.2. STELL

Rengjøres med lunkent vann som evt. er tilsatt en pH-neutral såpe. Desinfeksjon er mulig, men løsemiddelbaserte rengjøringsmidler (som terpentin) må ikke anvendes.

1.7.3. POLSTREDE OVERFLATER

Kunststoff/kunstskinn: rengjøres med en godt vridd klut med vann eller mild såpe.

Polyuretanskum: Polstring på kroppsstøttering, håndbøyle og rumpestopper tørkes lett over med en desinfiserende klut.

Merk: På www.vermundlarsen.no kan du finne rengjøringsveiledninger for alle våre standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUKSHJELPEMIDDEL


Din VELA Meywalk 4 kan gjenbrukes når du ikke lengre har bruk for den så lenge den får service av en tekniker i forkant.

Forventet levetid for gåstolen er 5 år ved normal og korrekt bruk. Vi anbefaler at VELA, din VELA-leverandør eller kvalifisert fagpersonale utfører årlige ettersyn med eventuell bytting av slidedeler.

1.8. GJENBRUK OG AVHENDING


Dette produktet inneholder materialer som kan gjenbrukes. Derfor skal produktet avhendes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending og gjenbruk bidrar til å forhindre negative påvirkninger på miljø og mennesker.

1.9. PRODUKTOVERBLIKK

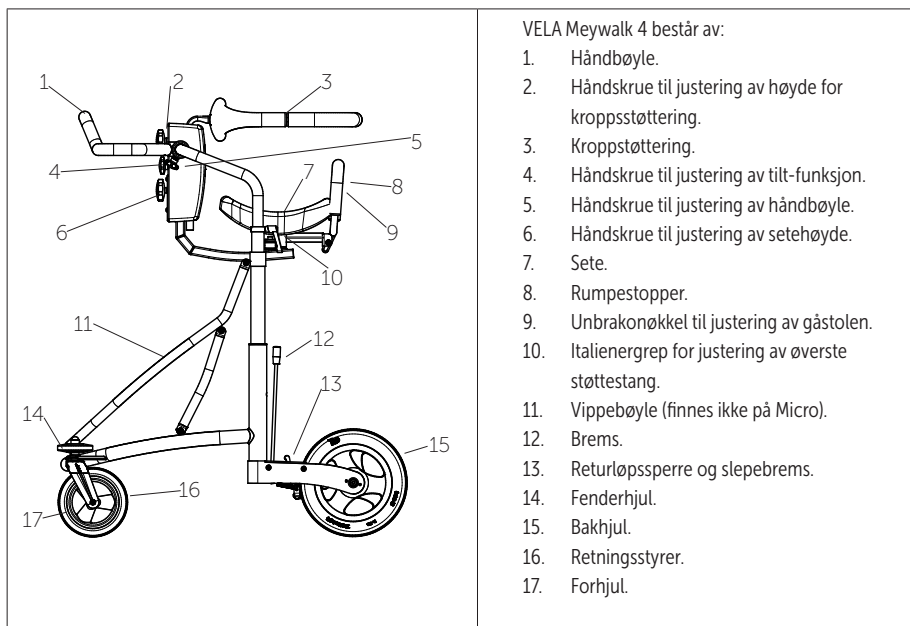

VELA Meywalk 4 har et bredt tilbehørsprogram som gjør det mulig å tilpasse gåstolen til den individuelle brukers behov. Utvalget av tilbehør til VELA Meywalk 4 kan finnes på www.vermundlarsen.no.


2.0. BRUKERMANUAL

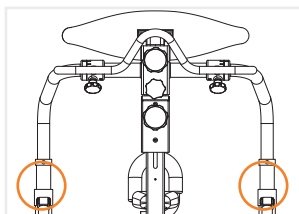

2.0.1. MONTERING AV OVERDEL OG UNDERSTELL


Overdelen plasseres i støttestangen på understellet. Overdelen senkes på plass i de to støttestengene.

Merk: håndbøylen skal vende fremover mot de dreibare forhjulene.

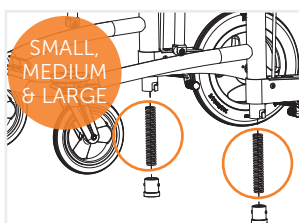


2.0.2. MONTERING OG UTSKIFTING AV FJÆR

Løsne vippebøylen og løft den til øverste stilling, slik at de nederste støttestengene blir synlige foran bakhjulene. Trykk og dreii den sorte bunnproppen slik at den kan tas av og fjærens plassering blir synlig. Monter/bytt ut fjæren, før proppen opp i sporet og dreii den på plass inntil den låser seg.

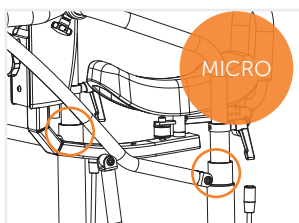

2.0.3. MONTERING OG BYTTING AV FJÆR (MICRO)


Løft gåstolens overdel (se punkt 2.0.1.) og deretter kan fjærene enkelt monteres/byttes ut.

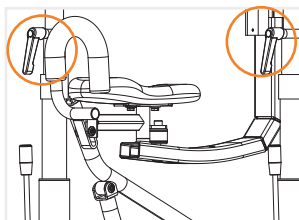

2.0.4. HØYDEJUSTERING

Løsne italienergrepene på begge sider og juster rammen til ønsket høyde. Det er viktig at høyden justeres likt på begge sider av rammen. Stram italienergrepene igjen på begge sider.


Merk: Det skal aldri foretas høydejustering mens gåstolen er i bruk.

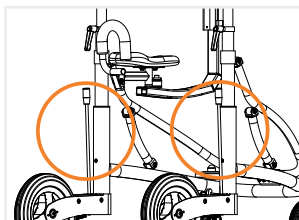

2.0.5. BREMS


Bremsestengene ligger foran bakhjulene. Trekk begge bremsestengene bakover for å aktivere bremsefunksjonen på begge sider. Bremsene deaktiveres ved å trekke begge bremsestengene fremover igjen.

Merk: Bremsen skal alltid være låst ved inn- og utstigning.

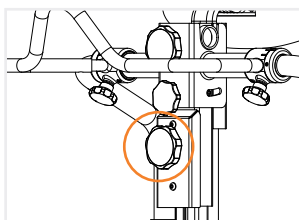


2.0.6. JUSTERING AV SETEHØYDE

Løsne den nederste håndskruen (trykk og dreii) foran på gåstolen. Setet kan nå justeres opp og ned. En hånd under setebøylen får setet til å gli lettest. Juster setehøyden til brukerens skrittlengde og stram håndskruen igjen slik at setebøylen låses på plass. **Merk:** Det skal aldri foretas høydejustering mens gåstolen er i bruk.

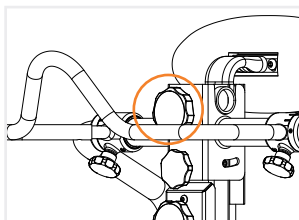


2.0.7. JUSTERING AV HØYDEN PÅ KROPPSTØTTERING

Løsne den øverste håndskruen (trykk og dreii) foran på gåstolen. Juster kroppstøttingen til ønsket høyde og stram håndskruen. Korrekt høyde varierer avhengig av brukerens kroppsbygning og behov for bevegelsesfrihet. Løsne de to unbrakoskruene foran på kroppstøttingen for bytte ut kroppstøttingen. **Merk:** kroppstøttingen skal aldri byttes mens gåstolen er i bruk.

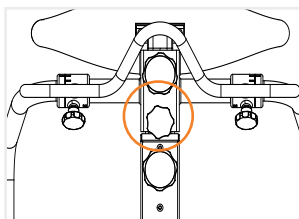


2.0.8. VIPPEFUNKSJON

Drei den midterste håndskruen foran på gåstolen for å vippe. Når håndskruen dreies, oppnås en endring av brukerens kroppsholdning ved at kroppstøttingen og setets vinkling endres. Vippefunksjonen er trinnløs. **Merk:** Vippen skal aldri justeres mens gåstolen er i bruk.

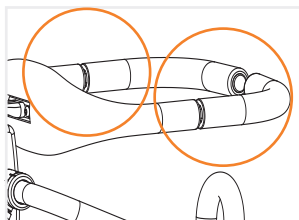


2.0.9. KROPPSSTØTTERING

Kroppstøttingen åpnes ved å trekke de ytterste håndtakene (på baksiden) oppover. Kroppstøttingen lukkes ved å trekke håndtakene ned igjen slik at åpningen blir mindre. **Merk:** Kroppstøttingen skal alltid være lukket når gåstolen er i bruk.

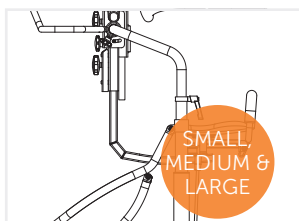

2.0.10. INN- OG UTSTIGNING


Ta tak foran på vippebøylen* med begge hendene og vipp den oppover. Dette senker seteenheten, noe som gjør inn- og utstigning lettere (Micro kan ikke flyttes). Seteenheten heves igjen ved å trykke vippebøylen nedover til den låser seg på plass med et hørbart klikk. **Merk:** Husk å lukke kroppstøtting (se punkt 2.0.9.) og låse rumpestopper (se punkt 2.0.12.) når gåstolen er i bruk.

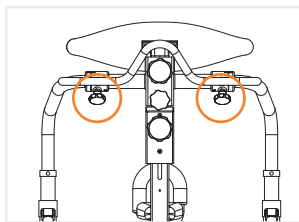

2.0.11. JUSTERING AV HÅNDBØYLE

Vinkelen på håndbøylen justeres ved hjelp av to håndskruer. Drei håndskruene i retning mot klokken, slik at håndbøylen kan roteres. Der er tre standardinnstillinger for håndbøylen. Husk å stramme håndskruene igjen.


Merk: håndbøylen kan settes i lodrett position slik at brukeren har fri adgang til arbeidsbord, kjøkkenbord o.l.

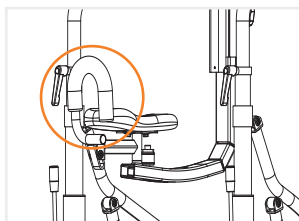

2.0.12. BRUK AV RUMPESTOPPER


Rumpestopperen bør alltid være oppslått når gåstolen er i bruk. Sving rumpestopperen oppover slik at den hviler mot setet og låser seg. Løft rumpestopperen oppover og sving den nedover for å åpne rumpestopperen igjen når brukeren skal ut av gåstolen.

*Slipp aldri vippebøylen når denne løftes eller senkes.

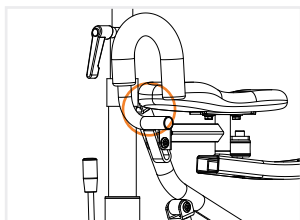

2.0.13. JUSTERING AV RUMPESTOPPER


Rumpestopperen skal være slått ned slik at man se en unbrakoskrue inne i firkantprofilen. Løsne skruen og juster lengderetningen til den ønskede posisjonen. Husk å stramme unbrakoskruen igjen

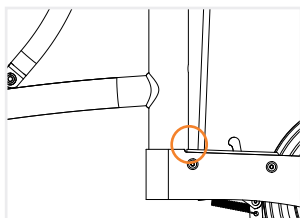

2.0.14. SLEPEBREMS

Ved aktivering av slepebremsen økes motstanden på den aktuelle siden. Dette kan både redusere farten (begge sider) og korrigere for skeiv gange (en side). Løsne mutteren ved skruerbunnen og juster skruen til den ønskede motstanden er oppnådd. Stram mutteren igjen.


Merk: Slepebremsen justeres individuelt på hver side.

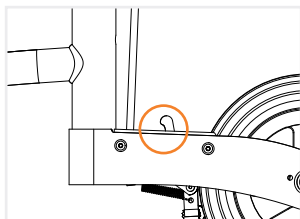

2.0.15. RETURLØPSSPERRE

Ved å aktivere returløpssperren ved begge bakhjulene kan gåstolen kun bevegese fremover. Aktiver den ved løfte opp den sølvfargede knappen og deaktiver ved å trykke på den sorte returknappen.

Merk: Aktiver/deaktiver alltid returløpssperren på begge sider.

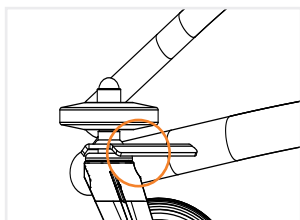

2.0.16. RETNINGSSTYRER

Når retningsstyreren aktiveres kan vognen kun bevege seg i en rett linje fremover/bakover. Dreie knappen på klikklåsen mens hjulet står i rett stilling, slik at låseklinten treffer hullet i hjulgauffelen. Deaktiver ved å trekke knappen på klikklåsen bakover og dreie den til låst tilstand - slik at hjulet kan rotere fritt.

Merk: Aktiver/deaktiver alltid retningsstyreren på begge sider.

