



Tilbehør til VELA-stoler

Individuelle tilpasninger som støtter nedsatt funksjonsevne og øker funksjonsnivået

Nakkestøtter



Ryggstøtter



Kroppsstøtter



Seter



Kjørebøyler



Amputasjonsstøtter



Armlener



Bremsegrep



Hjul



Benstøtter







Innholdsfortegnelse

Hvorfor skal brukeren ha en VELA-stol?	4
Ståstøttestol eller arbeidsstol?	4
Elektrisk eller gassdrevet høydejustering?	5
Hvilken stolmodell skal brukeren ha?	6
Muligheter for tilbehør i forhold til:	7
Nedsatt balanse	8
Amputasjon	8
Tretthet	10
Lammelse	10
Smerter	12
Ryggproblematikk	12
Nedsatt funksjon i ben	14
Nedsatt funksjon i hender	14
Luftveisutfordringer	16
Nedsatt koordineringsevne	16
Trykkavlastning	18
Bedre arbeidsmiljø for helsepersonell	18



Hvorfor skal brukeren ha en VELA-stol?



Mange sykdommer, forbigående eller kroniske, kan føre til ulike funksjonsnedsettelser som varierer fra sykdom til sykdom, men også fra person til person. VELA har mange varianter av stoler designet for å imøtekomme nedsatt funksjonsevne. Alle stolmodeller støtter og øker brukerens aktivitetsnivå og selvstendighet i forhold til å utføre aktiviteter hjemme og på arbeidsplassen.

Ståstøttestol eller arbeidsstol?

Ståstøttestoler og arbeidsstoler hjelper i henholdsvis stående og sittende stilling. Begge stoltypene er energibesparende og gir frie hender slik at brukeren kan utføre aktiviteter i en sikker stol med brems i riktig høyde. Brukeren har muligheten til å gå eller skyve stolen rundt i hjemmet ved hjelp av bena.

STÅSTØTTESTOLER

Støtter og avlaster primært i stående stilling ved å justere setet i en høy posisjon. Passer for brukere med en sikker ståevne men som for eksempel har nedsatt balanse og/eller lett blir slitne. En trygg og stabil stol som gir støtte for å opprettholde kroppens balanse og trygghet under gjennomføring av aktiviteter. Stolens korte sete gir en åpen hoftevininkel, noe som øker bevegelsesfriheten. Stolen avlaster kneet og hoften og kompenserer for nedsatt balanse så vel som nedsatt styrke i bena.



ARBEIDSTOLER

Gir først og fremst støtte ved sittende aktiviteter hvor man tidligere måtte stå, slik at man kan spare krefter og redusere risikoen for fall. Passer for brukere med nedsatt ståfunksjon og/eller som lett blir slitne. En trygg og stabil stol som gir støtte og trygghet når man utfører aktiviteter i sittende stilling. Stolen kompenserer for bl.a. redusert balanse, redusert styrke i bena og nedsatt utholdenhet.





Elektrisk eller gassdrevet høydejustering?



De grunnleggende funksjonene til ståstøtte- og arbeidsstoler er; hjul (mobilitet), ergonomisk god stol med armlener (komfort og stabilitet), brems (sikkerhet) og høydejustering, slik at stolen kan tilpasses ulike aktiviteter i ulike høyder. Man kan velge elektrisk eller manuell høydejustering (gassfjær).

ELEKTRISK HØYDEJUSTERING

Elektrisk høydejustering gir god støtte for brukere som har balanseproblemer og som opplever vanskeligheter ved selvstendig flytting fra sittende til stående stilling og omvendt. I tillegg reduserer elektrisk høydejustering uønskede støt og rykk som kan oppstå i forbindelse med en manuell høydejustering, noe som kan forårsake smerter og ubehag hos noen brukere. Elektrisk høydejustering gjør at stolen kan komme enda høyere opp enn en stol med gass, da man ikke er avhengig av hjelp fra føtter og ben. Stolen kan for eksempel stilles høyt og setet vippes forover slik at brukeren kan flytte på seg ved å la seg "skli" ut av stolen til stående stilling med minimal bruk av krefter. Med elektrisk høydejustering kan brukeren justere arbeidshøyden til den enkelte aktivitet trygt og uten bruk av krefter, og dermed øke rekkevidden betydelig.

GASSDREVET HØYDEJUSTERING

Manuell høydejustering med gassfjær anbefales for brukere som har redusert benstyrke og balanseproblemer, men som uavhengig kan forflytte seg fra sittende til stående stilling og omvendt med støtte fra stolen. Høydejusteringen gjør at brukeren kan justere arbeidshøyden til den enkelte aktivitet, noe som øker rekkevidden, bevegelsesfriheten og selvstendighet ved gjennomføring av aktiviteten.



Ståstøttestoler med gass

- :: Når man kan utføre aktiviteter i stående stilling, men trenger sikkerhet og støtte for å opprettholde balansen.
- :: En trygg, høy plass å arbeide fra som gir god støtte og stabilitet ved stående aktiviteter.
- :: Bra for mange aktiviteter siden stolen gir støtte ved tretthet, noe som gjør at aktiviteten kan fortsette siden man sparer på kreftene.



Arbeidsstol med gassfjær

- :: Når man har behov for å sitte for å utføre aktiviteter hvor man tidligere ville stått, f.eks på grunn av dårlig balanse og redusert utholdenhet.
- :: En trygg og stabil plass å arbeide fra for personer med redusert utholdenhet og balanseproblemer, som med støtte fra stolen kan skifte fra sittende til stående stilling og omvendt.
- :: Bra ved mange aktiviteter, siden man kan bevege seg rundt og bremse stolen når man utfører aktiviteter.



Arbeidsstol med elektrisk justering

- :: Når man har behov for å sette seg ned ved aktiviteter hvor man tidligere ville stått, f.eks. på grunn av smerter eller manglende styrke i bena.
- :: En sikker og stabil plass å arbeide fra hvor høyden kan justeres, hvilket hjelper brukeren med å skifte, uten hjelp, fra sittende til stående stilling og omvendt.
- :: Bra for mange aktiviteter i høyden hvor man ikke er avhengig av hjelp fra føtter og ben ved elektrisk høydejustering, og har derfor muligheten for høyere sittehøyde enn på en manuell stol.
- :: Reduserer uønskede støt og rykk som kan oppstå i forbindelse med en manuell høydejustering, som for noen brukere gir smerter og/eller ubehag.



Ulike typer funksjonsnedsettelse krever ulike produktløsninger for å gi best mulig støtte for brukeren. Dette øker dermed brukeres muligheter til å utføre hverdagslige aktiviteter.

På de kommende sidene gir vi en innføring i muligheter for tilbehør som gir best mulig støtte for vanlige typer funksjonssvikt. På denne måten får brukeren benyttet sin arbeids-/ståstøttestol optimalt i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter, og oppnår dermed en høyere grad av selvstendighet.


STANDARDTILBEHØR SOM EGNER SEG FOR GJENBRUK

Tilbehør til VELA-stoler er i hovedsak lagerførte standardprodukter. Dette betyr at tilbehøret kan gjenbrukes på andre stoler, samt at stoler med tilbehør stort sett har samme leveringstid som stoler uten tilbehør. Vi lager også stoler med individuelle tilpasninger til den enkelte bruker, som for eksempel utskjæring i setet. Her må lengre leveringstid påberegnes.

VEILEDNING OG MER INFORMASJON

Ikke alle typer tilbehør nevnes på de følgende sidene. En oversikt over tilbehøret for spesifikke stolmodeller kan sees på vermundlarsen.no under den aktuelle modellen. VELAs konsulenter tar gjerne med demoutstyr og veileder gjerne om riktig tilbehør i forhold til brukerens situasjon. VELA har også kundeservice via både e-post, telefon og chat.

Nedsatt balanse

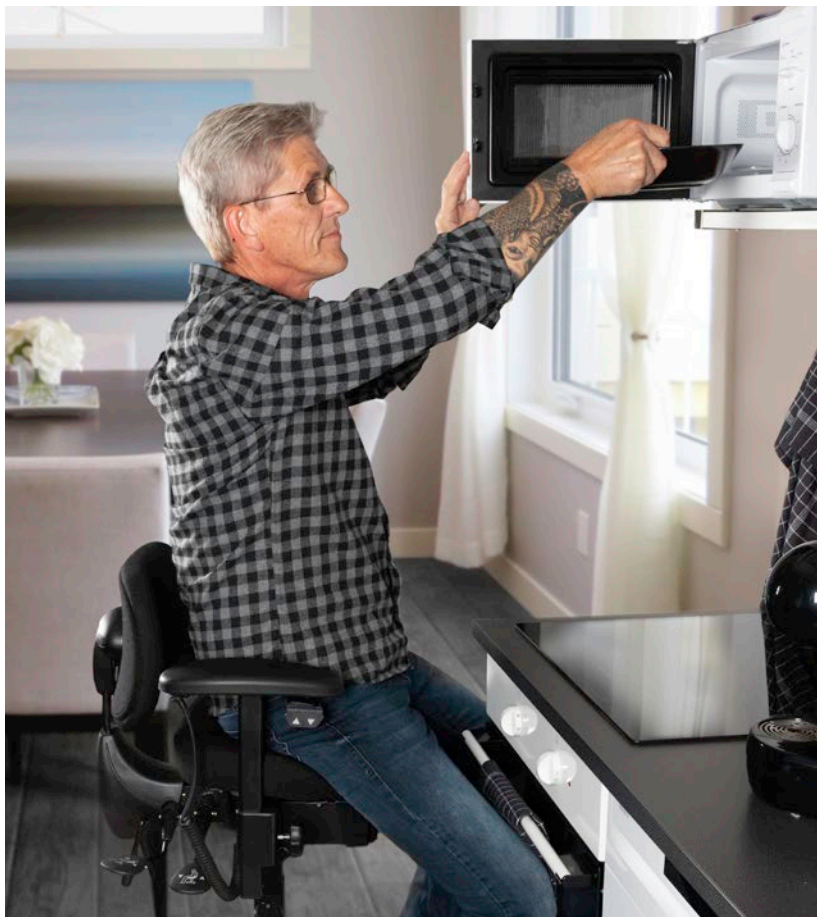

Redusert balanse kan føre til utrygghet ved gjennomføring av aktiviteter, som igjen kan begrense brukeren i hverdagen.

En arbeidsstol gir god stabilitet mot underlaget og gir støtte for brukeren via sete og armlener. Dette gir brukeren økt trygghet i utføring av aktiviteter uten å måtte bekymre seg over å holde balansen.

I sittende har brukeren også to frie hender, noe som gjør det enklere å utføre aktiviteter uten å måtte bruke en hånd for å holde balansen. Stolen gir også mobilitet i sittende stilling, da brukeren har mulighet til å gå eller skyve seg rundt mens han eller hun sitter i stolen.

Amputasjon



Amputasjon kan gi funksjonsnedsettelse av varierende grad, men resultatet er ofte at brukeren trenger støtte og avlastning ved utførelse av arbeidsoppgaver.

For mennesker med amputasjoner kan en sittestilling gi bedre muligheter for å utføre aktiviteter sammenlignet med en stående stilling, da dette kan spare energi og krefter. En arbeidsstol er derfor hensiktsmessig i forhold til amputasjon, siden brukeren kan sitte med god støtte og utføre ulike aktiviteter.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDSETTELSE:

Apopleksi, cerebral parese, infeksjon i nervesystemet, Parkinsons sykdom og multipel sklerose

NEDSATT
BALANSE



Elektrisk høydejustering støtter brukeren når han eller hun setter seg ned og reiser seg fra stolen. Det sparer også energi, da brukeren slipper å bruke krefter på å justere sittehøyden til ulike aktiviteter.



Oppfellbar fotbøyle gir støtte og god bakkekontakt ved aktiviteter som utføres høyt oppe.



Forlenget bremsestang eller t-bremsegrep gjør at brukeren enklere kan nå bremsen og unngå å måtte vri på overkroppen. Med et t-bremsegrep får også brukeren en større gripeflate, slik at det er lettere å få tak på.



Setefasongen kan være med på å forbedre brukerens aktivitetsmuligheter og utførelse, da mesteparten av mobiliteten og balansen i sittende stilling oppnås fra sete og ryggstøtte. Ved en ståstøttestol kan det f.eks. være en fordel å velge et Midi-sete (VELA Salsa 120), da setets snitt gir brukeren maksimal stabilitet helt opp i stående stilling.



4-hjulsbrems gjør at stolen står ekstra stabilt, f.eks. ved forflytning eller når man går inn og ut av stolen.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDSETTELSE:

Diabetes, trafikk- og arbeidsulykker, kreft og infeksjoner

AMPUTASJON



Elektrisk høydejustering hjelper brukeren med å komme seg opp i stående stilling, til å gå inn og ut av stolen og til å oppnå trygg forflytning til/fra seng eller annen stol. Elektrisk høydejustering kompenserer for bruk av kraft, som f.eks. ved endring av sittehøyde ved ulike aktiviteter.



Artrodese-sete gir mulighet for å vinkle høyre og venstre side av setefronten annerledes. Ved for eksempel amputasjon av lårben, kan det ene benet behøve en mer åpen hoftevinkel enn det andre.



Amputasjonsstøtte via forlengelse av setet kan hjelpe med full støtte og avlastning av amputerte ben i sittende stilling. Den kan justeres og monteres/demonteres etter brukerens behov.



Seteutformingen kan tilpasses den enkelte bruker, hvor for eksempel et asymmetrisk sete i noen tilfeller kan være en mulighet til å gi støtte og lindring for det amputerte benet.



Armlensputer i ulike lengder og for eksempel ekstra myke materialer, kan avlaste i sittestilling og lette forflytning til f.eks. seng eller annen stol.



Betjening av funksjonsgrep kan plasseres på høyre eller venstre side, for eksempel ved amputering av underarm. Håndbremsen kan flyttes fra den ene siden til den andre uten bruk av verktøy.

Tretthet



Tretthet/redusert utholdenhet er en stor utfordring i hverdagen for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til for eldre mennesker.

En arbeids-/ståstøttestol gir mulighet for å justere arbeidshøyden. Dermed kan man utføre aktiviteter trygt og med minst mulig bruk av energi. Brukeren bruker ikke unødvendig energi på å stå eller holde balansen, siden stolen gir støtte. Energisparing kan gi brukeren bedre anledning til å gjøre ulike lystbetonte aktiviteter.

Lammelse



Lammelse fører til at bevegelighet og funksjonsnivå reduseres og selvstendig gjennomføring av hverdagsaktiviteter blir vanskeligere.

En arbeidsstol gir trygghet og stabilitet, slik at brukeren kan utføre aktiviteter i sittende stilling i stedet for å gjøre dem stående. De lettgående hjulene gir mulighet for sittende mobilisering, da brukeren har mulighet til å gå eller skyve stolen rundt i boligen.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

ALS, fibromyalgi, hjertesykdommer, KOL, multippel sklerose (MS) og muskelsvinn

TRETTTHET



Elektrisk høydejustering hjelper brukeren med å komme seg opp i stående stilling, med å gå inn og ut av stolen og trygg forflytning til/fra seng eller annen stol. Elektrisk høydejustering kompenserer for bruk av krefter ved endring av sittehøyde til ulike aktiviteter.



Oppfellbar fotbøyle gir støtte og god bakkekontakt ved aktiviteter i høyden.



T-bremsegrep gir kortere avstand til bremsen og større gripeflate, noe som gjør at man ikke bruker unødig energi på å betjene den.



Seterotasjon, slik at man unngår å vri kroppen og eventuelle smerter i den sammenheng. Stolen kan roteres innunder f.eks. et bord, slik man ikke behøver å flytte hele stolen. Dermed sparer man energi.



Store, lettgående hjul gjør det lettere å gå/skyve stolen rundt, slik at brukeren kan spare krefter.



Elektriske funksjoner på f.eks. brems og høydejustering kan være en mulighet, da brukeren kan gi et lett trykk på en bryter og bruke et minimum av krefter på å aktivere funksjonen. Bryteren kan plasseres der hvor det er mest praktisk for brukeren, og kan fås i ulike fasonger – alt etter behov.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Apopleksi, cerebral parese, infeksjon i nervesystemet, parkinsons sykdom og multippel sklerose

LAMMELSE



Sete og ryggstøtte kan fås i ulike former som f.eks. med støttende kroppsstøtter eller lårstøtter. Ulike typer skum og snitt kan være en løsning for å støtte brukerens balanse og å oppnå optimal støtte og komfort. Et setetrekk beskytter mot fuktighet og søl som f.eks. ved inkontinens, og kan vaskes ved 60 grader.



Sidemontert benstøtte kan være en fordel ved f.eks. hemiparese da den støtter fot og ben på den lammede siden for en optimal sittestilling. Den gir også trygghet når du beveger deg rundt mens du sitter i stolen.



Skålformet hemi-armlene støtter den lammede armen/hånden og sørger for at den ikke faller til siden. Det er også mulighet for vinkling av armlenet, f.eks. inn foran kroppen, ved behov.



Kroppsstøtter gir støtte i tilfelle overkroppen faller ned, som f.eks. på grunn av tretthet i løpet av dagen.



Elektriske funksjoner på f.eks. brems og høydejustering kan være en mulighet ved ulike typer lammelser, siden funksjonene aktiveres ved en lett berøring av bryteren, som kan plasseres der det er mest praktisk for brukeren.



Betjening av funksjonsgrep kan f.eks. ved hemiparese plasseres på høyre eller venstre side. Håndbrems kan flyttes fra den ene siden til den andre uten bruk av verktøy.

Smerter



Smerter oppleves ofte i forbindelse med uførhet og som følge av sykdom.

En arbeidsstol/ståstøttestol gir en god sittestilling med optimal støtte og komfort fra ryggstøtte og sete. Stolens brems gir stabilitet, som kan bidra til å redusere smerter og samtidig støtte brukeren i aktiviteten.

Ryggproblematikk



Ryggproblematikk fører ofte til begrenset bevegelighet og smerter. Dette kan føre til at overskudd til aktiv deltagelse i hverdagen reduseres, og aktiviteter en tidligere har mestret kan virke overveldende og velges derfor bort.

En arbeids-/ ståstøttestol har stabile armlener som brukeren kan støtte seg på når han eller hun går inn og ut av stolen, noe som gir en myk og rolig overgang.

ALB-ryggstøtten er en unik ryggstøtte utviklet av VELA, hvor rygg- og korsryggstøtte er todelt. Ryggstøtten gir ergonomisk støtte til både korsrygg og bekken, støtter den naturlige svaien i korsryggen og fremmer en god holdning. Dette kan bidra til å lindre ryggsmerter og samtidig styrke muskulaturen i ryggen.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Fibromyalgi, gikt, kreft, multipel sklerose (MS) og andre bindevevssykdommer

SMERTER



Elektrisk høydejustering gir trinnløs kontrollert bevegelse, slik at brukeren unngår støt eller rykk i kroppen som ellers kan oppstå når en stol har manuell høydejustering eller når man setter seg eller reiser seg opp.



Myke armlensputer i ulike lengder kan i noen situasjoner være en forutsetning for at armlenene skal kunne gi støtte i sittestillingen, da myke armlener kan redusere smerter og gi bedre støtte og avlastning for armen.



Sete og ryggstøtte med ulike fasonger, skumtyper og snitt bidrar til å redusere smerter.



Store lettgående hjul gjør stolen lettere å gå med/skyve rundt i sittende stilling, slik at man belaster kroppen så lite som mulig.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Skiveprolaps, nakkeslengskade, kyfose, osteoporose og skoliose

RYGGPRO-
BLEMATIKK



Elektrisk høydejustering gjør det lettere å gå inn og ut av stolen slik at man unngår rykk/støt når man reiser og setter seg, noe som kan bidra til å redusere risikoen for smerter.



Ryggstøtte finnes i ulike fasonger etter hvilket støttebehov man har. Individuelle ryggputer kan også lages med ulike skumtyper.



Nakkestøtte gir stabilitet, trygghet og en bedre hvilestilling, slik at man avlaster rygg og nakke, f.eks. ved smerter og tretthet.



Store lettgående hjul gjør det lettere å gå/skyve stolen rundt mens man sitter, slik at man bruker minimalt med krefter.



Forlenget bremsestang eller t-bremsegrep gjør at brukeren lettere kan nå bremsen og ikke må strekke seg eller vri kroppen for å nå den. Ved bruk av t-bremsegrep får man også en større gripeflate.



Elektriske funksjoner på f.eks. brems og høydejustering kan være en mulighet, da brukeren kan gi et lett trykk på en bryter og bruke et minimum av krefter på å aktivere funksjonen. Bryteren kan plasseres der hvor det er mest praktisk for brukeren, og kan fås i ulike fasonger - alt etter behov.

Nedsatt funksjon i ben



Nedsatt benfunksjon fører ofte til bevegelsesvansker og til smerter, som kan bidra til at funksjonsnivået og evnen til å være selvhjulpent reduseres. En arbeids-/ ståstøttestol kompenserer for manglende kraft i beina, slik at man kan f.eks. utføre mer krevende aktiviteter i sittende stilling i stedet for stående. Elektrisk høydejustering kompenserer i mange situasjoner for manglende styrke og funksjon i beina og sparer energi, f.eks. ved forflytning.

Nedsatt funksjon i hender



Nedsatt funksjon i hendene kan komme til uttrykk på mange måter: stivhet i ledd, redusert styrke, redusert mobilitet, nedsatt gripefunksjon og bevegelsesvansker.

Man kan f.eks. oppleve smerter og berøringsforstyrrelser, når man bruker hendene. I slike tilfeller kan det være vanskelig å betjene stolens funksjoner og å utnytte stolen fullt ut.

Spesielle håndtak for stolens funksjoner er en fordel, da det blir lettere for brukeren å styre og bruke stolens funksjoner uten særlig bruk av finmotorikk eller styrke.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Apopleksi, CP, skiveprolaps, leddgikt, muskelsvinn og multipl sklerose (MS)

NEDSATT
FUNKSJON
I BEN



Elektrisk høydejustering kompenserer i mange situasjoner for manglende krefter og funksjon i bena, og gjør det mulig å spare på kreftene f.eks. ved forflytning. Elektrisk høydejustering støtter også brukeren i å komme seg opp i stående stilling, og kan brukes til å hjelpe med å gå inn og ut av stolen.



Sete med lårstøtter gir støtte til bedre sittestilling hvis bena har en tendens til å falle ut til siden, f.eks. ved nedsatt muskeltonus. Da slipper man å måtte kompensere og bruke unødvendige krefter på å oppretholde sin sittestilling med f.eks. lår eller hofter.



Sidemontert benstøtte kan være en fordel ved f.eks. droppfot eller nedsatt funksjon i det ene benet. En benstøtte gir støtte til fot eller ben for å gi en bedre sittestilling, og gir støtte når man beveger seg rundt mens man sitter i stolen.



Lårstøtter er en mulighet hvis bena faller ut til siden f.eks. ved muskelslapphet, da den gir støtte for en bedre sittestilling og brukeren unngår å bruke unødvendige krefter i f.eks. lår eller hofter siden lårstøtten hjelper med å holde bena på plass.



Abduksjonskloss støtter en bedre sittestilling. Hvis bena har tendens til å bevege seg innover, kan man med denne kompensere for uønsket trykk på hofter og bekken.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Gikt, karpaltunnelsyndrom, ledd- og senebennelse, Parkinsons sykdom og multipl sklerose

NEDSATT
FUNKSJON
I HENDER



Forlenget bremsestang og T-bremsegrep gir kortere avstand til bremsen. T-bremsegrep gir en større gripeflate, og kan f.eks. betjenes med armen eller håndbaken. Dette er en fordel hvis brukeren mangler finmotorisk gripefunksjon eller har andre utfordringer med å bruke hånden.



Giktgrep til betjening av stolens funksjoner gjør at det blir lettere for brukeren å betjene grepene med minst mulig bruk av krefter. Giktgrepet er spesielt på den måten at det har en praktisk form ift. å ha redusert styrke i hendene. Disse er også en fordel hvis brukeren har kort rekkevidde, da grepene er plassert nærmere brukeren ved setets kant og ikke under setet.



Elektriske funksjoner som f.eks. brems og høydejustering er en god mulighet ved manglende styrke i hender og armer, da funksjonene kan aktiveres ved et lett trykk. Funksjonsbryterne kan ha flere ulike fasonger alt etter behovet.



Betjening av funksjonsgrep kan plasseres på høyre eller venstre side, f.eks. hvis funksjonen i den ene hånden er betydelig redusert i forhold til den andre. Håndbremsen kan flyttes fra den ene til den andre siden uten bruk av verktøy.

Luftveisutfordringer



Når man har luftveisutfordringer er det utfordrende å utføre hverdagsaktiviteter uten å bli utslitt. En arbeids-/ståstøttestol kompenserer ved å gi best mulig støtte for aktiviteter, slik at man bruker minst mulig energi og krefter.

Luftveisutfordringer medfører ofte nedsatt balanse og svimmelhet. Derfor er det essensielt å ha en stabil stol som kan bremses for å kunne utføre daglige aktiviteter. Et ryggstøtte og mulighet for vinkling av ryggen gjør det mulig for brukeren å lene overkroppen bakover og på den måten åpne opp for luftveiene.

Nedsatt koordineringsevne



Manglende koordineringsevne kan føre til utrygghet og gi usikkerhet når brukeren utfører aktiviteter, og kan i verste fall føre til redusert aktivitet, utsettelse eller at man slutter med aktiviteter.

En arbeids-/ståstøttestol gir sittende trygghet og stabilitet ved gjennomføring av aktiviteter. I sittende stilling vil brukeren f.eks. ikke måtte konsentrere seg om å holde balansen, og vil derfor kunne fokusere kun på aktiviteten. Å kunne koordinere få ting om gangen gir brukeren de beste forutsetningene for mestring av aktiviteter med nedsatt koordineringsevne.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

Cystisk fibrose, KOLS, lungesykdommer og hjertesykdommer

LUFTVEISUT-
FORDRINGER



Elektrisk høydejustering hjelper brukeren med å komme seg opp i stående stilling, til å gå inn og ut av stolen og til å oppnå trygg forflytning til/fra seng eller annen stol. Elektrisk høydejustering kompenserer også for bruk av krefter ved f.eks. endring av sittehøyde til forskjellige aktiviteter.



Oppfellbar fotbøyle gir støtte under bena og god bakkekontakt ved aktiviteter som foregår høyt oppe.



Ryggstøtte med korsryggpumpe eller ALB-ryggstøtte kan justeres i lengden, noe som gir brukeren mulighet til å åpne luftveiene. En høy rygg kan gi ekstra trygghet, f.eks. når man lener seg bakover og åpner luftveiene, som bl.a. er en fordel ved spising.



Forlenget bremsestang eller t-bremsegrep gir kortere avstand til bremsen og større gripeflate, noe som gjør at man ikke trenger å bruke unødvendig energi på å betjene den. Ved bruk av t-bremsegrep får man også en større gripeflate.



Store lettgående hjul gjør det lettere å gå/skyve stolen rundt mens brukeren sitter, slik at man bruker minimalt med krefter.

EKSEMPLER PÅ DIAGNOSER FORBUNDET MED DENNE TYPEN FUNKSJONSNEDESETTELSE:

ALS, apopleksi, CP, leddgikt, hjertesykdommer, bindevevssykdommer, KOLS, Parkinsons sykdom og multippel sklerose

NEDSATT
KOORDINE-
RINGSEVNE



Elektrisk høydejustering hjelper brukeren med å komme seg opp i stående stilling, til å gå inn og ut av stolen og til å oppnå sikker forflytning til/fra seng eller annen stol.



T-bremsegrep forlenger bremsegrepet, slik at brukeren lettere kan nå/få tak på bremsen og få en større gripeflate.



Giktgrep til betjening av stolens funksjoner gjør at det blir lettere for brukeren å betjene grepene med minst mulig bruk av krefter. Giktgrepet er spesielt på den måten at det har en praktisk form ift. å ha nedsatt koordinasjonsevne. Disse er også en fordel hvis brukeren har kort rekkevidde, da grepene er plassert nærmere brukeren ved setets kant og ikke under setet.



Nakkestøtte gir stabilitet og trygghet i sittende stilling, noe som kan gi bedre fokus ift. aktiviteter og læring.



Elektriske funksjoner på f.eks. brems og høydejustering kan være en mulighet, da dette gir lettere adgang til funksjonen. Den elektriske funksjonen aktiveres med et lett trykk på en bryter, som kan plasseres der hvor det er mest praktisk for brukeren. Bryterne kan ha flere ulike fasonger alt etter behov.

Trykkavlastning



Når brukeren sitter mye og lenge i samme stilling, øker risikoen for å utvikle trykkskader. Endring av sittestilling og den rette trykkavlastningen for det belastede området kan være avgjørende ift. utvikling av trykkskade og for at brukeren kan opprettholde hverdagsaktiviteter.

Det er viktig å være opmerksom på stolens muligheter for setetilt i forhold til å kunne endre trykkfordeling. Bruk av setetilt reduserer risikoen for trykksår.

Bedre arbeidsmiljø for pleiepersonale



Hvis brukeren har behov for hjelp fra helsepersonell i dagliglivet som f.eks. ved institusjoner eller pleie- og aktivitetssentre, så er en arbeidsstol et sikkert og stabilt valg. Arbeidsstolen har hjul som gjør det enkelt å transportere brukeren til og fra en aktivitet, og en sentralbrems som gjør det trygt for brukeren å utføre aktiviteten.

Arbeidsstolen gir god sittekomfort og støtte, noe som gjør det mulig å sitte i lengre tid om gangen. Dette gjør det mulig å delta i aktiviteter, og evt. redusere antallet ganger brukeren må flytte på seg.



Elektrisk høydejustering gir hjelp med å gå inn og ut av stolen slik at brukeren unngår støt/rykk når hun eller han reiser og setter seg, noe som kan bidra til å redusere risikoen for dype vevsskader.



Seter kan spesiallages for den enkelte brukeren med individuell tilpasning ift. problematikk. Dette kan bl.a. gjøres med forskjellige typer skum eller snitt i setet, og kan bidra til forebygging. Et plansete gjør det mulig å bruke en trykkfordelende pute fra en annen leverandør.



Armlene og armlensputer i ulike design kan optimere støtte av armer og dermed øke muligheten for avlastning.



Sidemontert benstøtte kan avlaste og støtte legg og fot f.eks. ved nedsatt mobilitet, slik at de trykkbelastede/utsatte områdene kan avlastes eller støttes på en god måte, f.eks. på en motorisert arbeidsstol.



Elektrisk høydejustering støtter brukeren når han eller hun går inn og ut av stolen, noe som gir færre tunge løft for helsepersonalet. Elektrisk høydejustering forbedrer arbeidsstillingen for helsepersonell, f.eks. hvis brukeren har behov for bistand ved måltider eller ved påkledning. Brukeren kan også enkelt plasseres på nivå med seng eller annen stol ved overflytting.



Fotbrems gir en god arbeidsstilling for helsepersonell, da stolen kan bremses med et trykk med foten. Pleiepersonalet unngår dermed å måtte bøye seg fremover for å nå bremsen.



Kjørebøyle, som er enkel å høydejustere, gir trygghet og mobilitet hvis helsepersonalet skal flytte en bruker som sitter i stolen f.eks. til et annet rom.



Kvalifisert rådgivning og rask service

RÅDGIVNING

En del av kjernekompetansen hos VELA er rådgivning og deltagelse med testing hos brukeren. Vi bistår terapeuten i å finne stolen som dekker den enkelte brukers behov. Du sikrer at brukeren hjelpes med følger av permanente funksjonsnedsettelse så vel som ved midlertidige rehabiliteringsforløp.

Vi setter brukeren i sentrum og rådgir for å finne den beste løsningen.

Vi er selvsagt alltid klare til å gi råd og veiledning via telefon, e-post og chat.

RASK RESPONSTID

Service er en av våre kjernekompetanser i VELA. Vi har egne serviceteknikere og samarbeidspartnere over hele landet. Vi har kort responstid på service, reparasjoner og ombygging, og arbeidet kan ofte utføres hos brukeren slik at bruker ikke må være uten stolen sin.



ISO 9001
ISO 14001