




E-fodstøtter/ E-fotstøtter/ E-benstöd/ E-footrests - VELA Tango 700

Montagevejledning for E-fodstøtter på VELA Tango 700

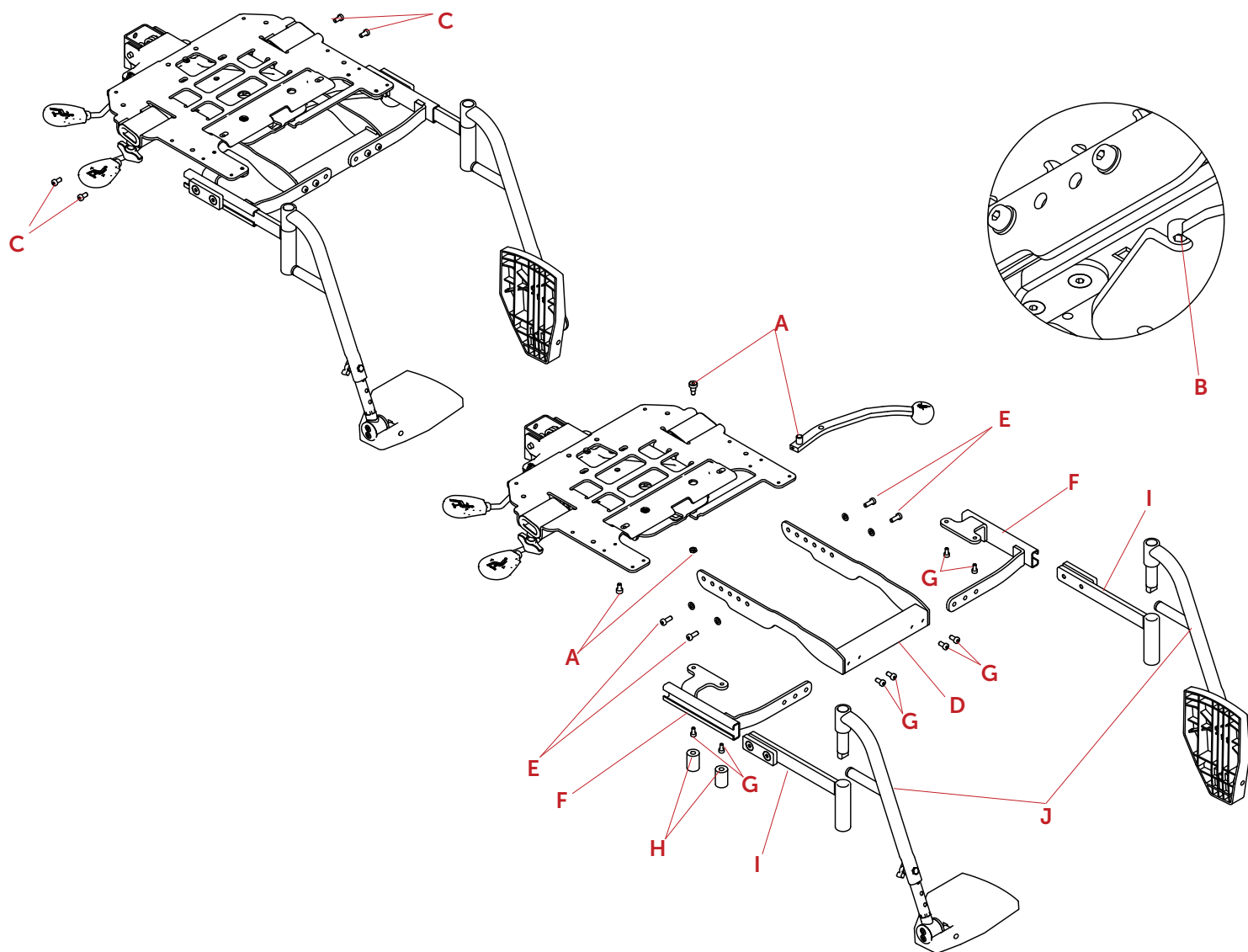

DANSK

1. Hvis stolen har sæderotation, skal dette fjernes ved at afmontere grebet (A). Rotation låses ved at montere en skrue (B) nedefra. Det kan være nødvendigt at afmontere afdækninger for at komme til.
2. De fire skruer (C) på siden af bærepladen fjernes.
3. Monteringsbeslag (928711) (D) skrues fast samme sted med fire M6x16 skruer (E). Husk skiver.
4. De to beslag (928746+928747) (F) monteres med tilhørende skruer (G) (2 x 4 stk.).
5. Er stolen med højdejusterbar gasfjeder, placeres udløsergrebet herunder med de længere skruer under afstandstykkerne (H).
6. Skydestang (928245) (I) monteres som vist på tegningen.
7. E-fodstøtter (J) sænkes ned i skydestængerne.



E-fodstøtter/ E-fotstøtter/ E-benstöd/ E-footrests - VELA Tango 700

VELA Tango 700

NORSK

1. Hvis stolen har seterotasjon, skal denne fjernes ved å demontere håndtaket (A). Rotasjonen låses med en skrue (B) som monteres nedenfra. Det kan være nødvendig å ta av deksler for å komme til.
2. De fire skruene (C) på siden av bærestøtten tas ut.
3. Monteringsbeslaget (928711) (D) skrus fast på samme sted med fire M6x16 skruer (E). Husk skiver.
4. De to beslagene (928746+928747) (F) monteres med tilhørende skruer (G) (2 x 4 stk.).
5. Hvis stolen har høydejusterbar gassfjær, festes utløserhåndtaket under med de lengre skruene under avstandsstykkene (H).
6. Skyvestenger (928245) (I) monteres som vist på tegningen
7. E-fotplater (J) senkes ned i skyvestangene.

SVENSKA

1. Om stolens säte har rotationsfunktion kan du ta bort det genom att avmontera handtaget (A). Rotationsfunktionen kan låsas med en skruv (B) monterad underifrån. Du kan behöva montera av skyddet för att komma åt.
2. Ta bort de fyra skruvarna (C) på sidan av stödplattan.
3. Skruva fast monteringsfästet (928711) (D) på samma ställe med fyra M6x16-skruvar (E). Kom ihåg brickorna!
4. Montera fast de två fästena (928746 + 928747) (F) med tillhörande skruvar (G) (2 x 4 stycken).
5. Om stolen har en höjdjusterbar gasfjäder, placeras frigöringsspaken under denna med de längre skruvarna under avståndshållarna (H).
6. Skjutstången (928245) (I) ska monterad enligt bilden
7. E-fotstöden (J) sänks ned i skjutstångerna.

ENGLISH

1. If the chair has a seat rotation, remove it by removing the handle (A). The rotation is fixed by mounting a screw (B) from below. You may need to remove covers to get to.
2. Remove the four screws (C) on the side of the support plate.
3. Mounting brackets (928,711) (D) screwed onto the same place with four screws M6x16 (E). Remember washers.
4. Mount the two brackets (928746 + 928747) (F) with the corresponding screws (G) (2 x 4 pieces).
5. If the chair is with height-adjustable gas spring, the release lever must be placed below with the longer screws under the spacers (H).
6. Adjustable rod (928245) (I) is mounted as shown in the drawing.
7. E-footrest (J) are mounted as shown.