




Enkeltfodstøtte H/V / Single footrest / Fotstøtte enkel - VELA Tango 700

Montagevejledning for enkeltfodstøtte på VELA Tango 700

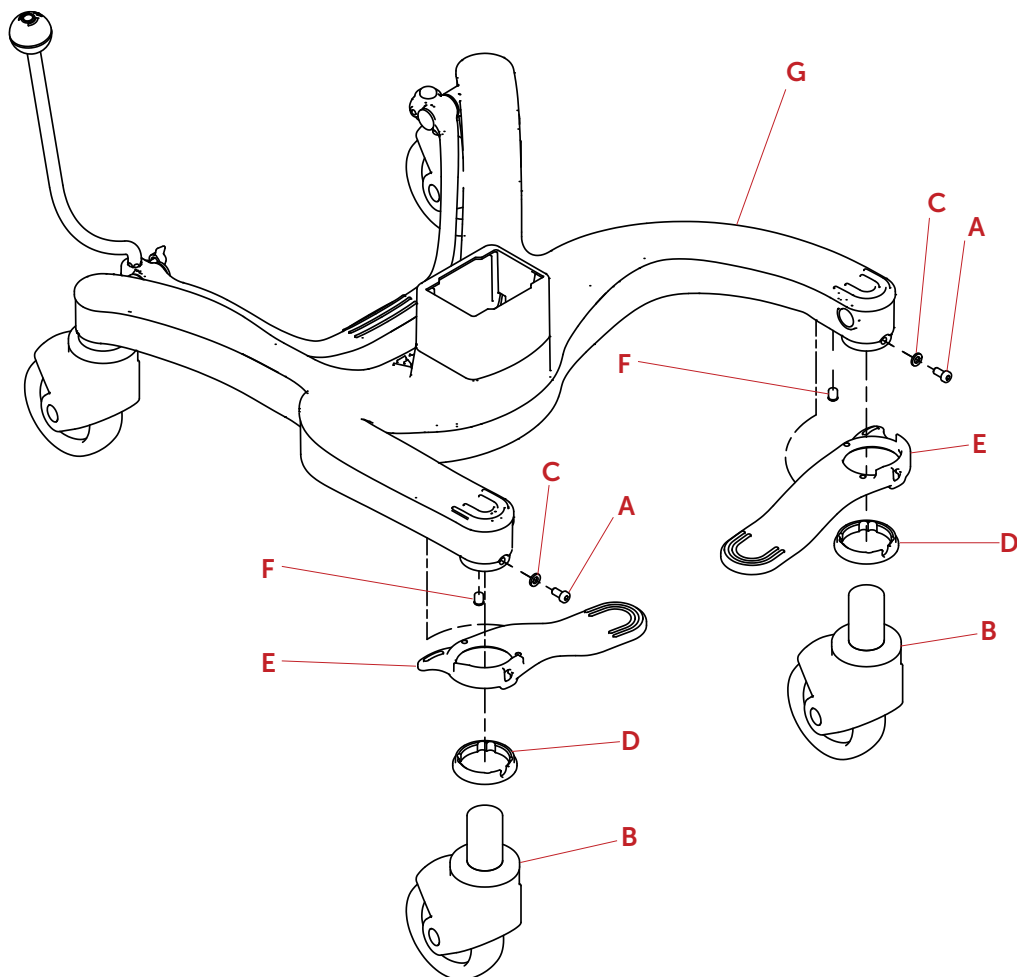

DANSK

1. Skru skruen (A) ud af forhjulet (B), for at frigøre det.
2. Fjern skrue (A) og skive (C).
3. Placer plastikbøsningen (D) i fodstøtten (E) nedefra, så hullerne til skruen passer sammen.
4. Placer trykstykke (F) i stellet (G) Ø8 hul.
5. Sæt fodstøtte (E) med plastikbøsning (D) omkring stellet (G) og hold på plads, mens forhjulet (B) monteres igen.
6. Monter skrue (A) og skive (C) i forhjulet (B) igen. Husk at dreje fodstøtte (E) og bøsning (D), så der er plads til skruen (A).

***Bemærk:** Fodstøtterne (E) har en højre og venstre udgave. Vend som på illustrationen.



Enkeltfodstøtte H/V / Single footrest / Fotstøtte enkel - VELA Tango 700

VELA Tango 700

NORSK

1. Skru skruen (A) ut av forhjulet (B), for å frigjøre det.
2. Fjern skrue (A) og skive (C).
3. Monter plastikkforing (D) i fotstøtten (E) nedenfra, så hullene til skruen passer sammen.
4. Plasser trykkstykket (F) i rammens (G) Ø8-hull.
5. Sett fotstøtte (E) med plastikkforing (D) på u-stell (G) og hold på plass, mens forhjulet (B) monteres igen.
6. Monter skrue (A) og skive (C) i forhjulet (B) igen. Husk at dreie fotstøtte (E) og foring (D), så der er plass til skruen (A).

***Bemerk:** Fotstøttene (E) har en høyre og venstre utgave. Vend som på illustrasjonen.

SVENSKA

1. Skruva loss skruven (A) från framhjulet (B) för att lossa den.
2. Ta bort skruven (A) och brickan (C).
3. Placera plastbussningen (D) i fotstödet (E) underifrån så att skruvhålen passar ihop.
4. Placera tryckstycket (F) i ramens (G) Ø8-hål.
5. Placera fotstödet (E) med plastbussning (D) runt ramen (G) och håll på plats medan du monterar framhjulet (B) igen.
6. Sätt tillbaka skruven (A) och brickan (C) i framhjulet (B). Kom ihåg att vrida fotstödet (E) och bussningen (D) för att passa på skruven (A).

***Obs:** Fotstöden (E) har en höger och vänster version. Titta på bilden.

ENGLISH

1. Unscrew the screw (A) from the front wheel (B) to release the front wheel.
2. Remove the screw (A) and washer (C).
3. Place the plastic bushing (D) in the footrest (E) from below so that the screw holes fit together.
4. Place spring plunger (F) in the frame (G) Ø8 hole.
5. Attach the footrest (E) with plastic bushing (D) around the frame (G) and hold in place while re-installing the front wheel (B).
6. Reinstall screw (A) and washer (C) in front wheel (B). Remember to turn the footrest (E) and bushing (D) to make room for the screw (A).

***NOTE:** The footrests (E) have a right and a left version. Position it as in the illustration.