




Batteri / Battery - VELA Tango 700

Montagevejledning - Udskiftning af batteri på VELA Tango 700

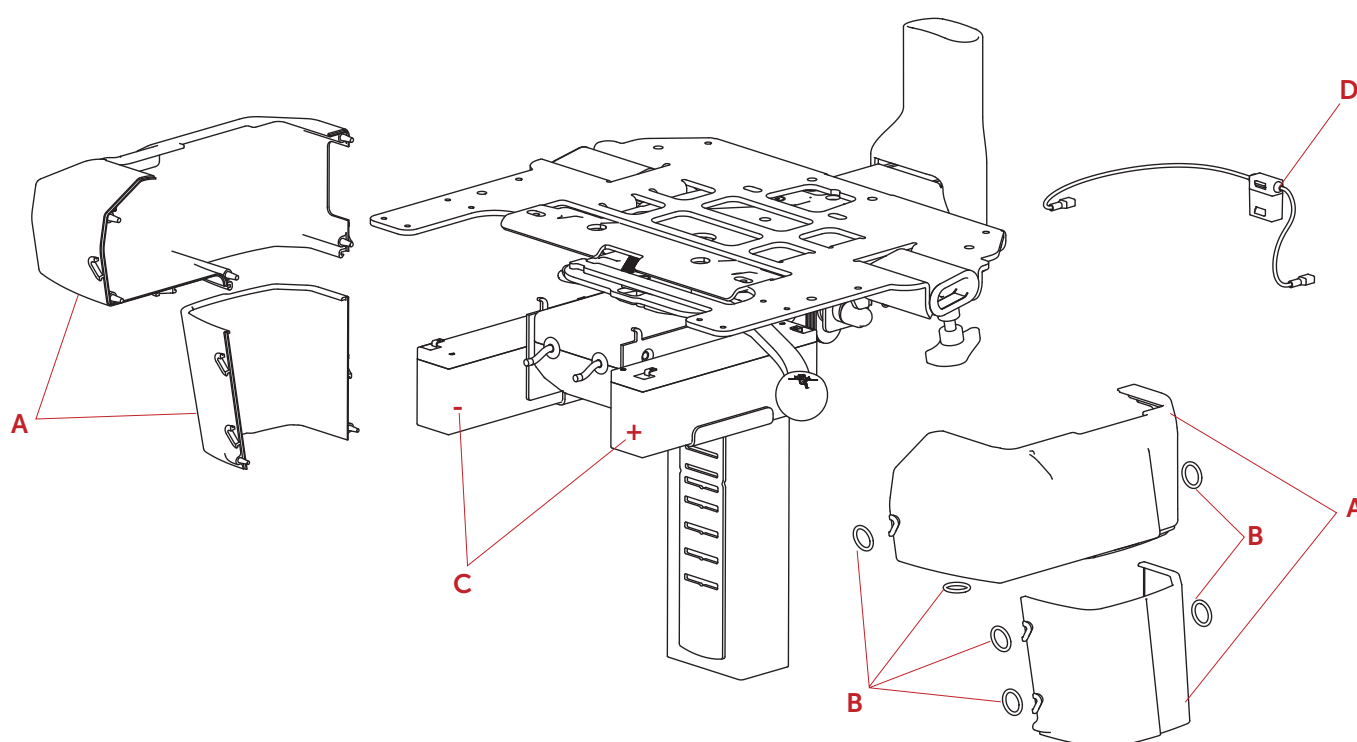

DANSK

1. Fjern afdækninger (A) ved at fjerne o-ringe (B) og trække til siden. Brug evt. en lille skruetrækker til at fjerne o-ringene (B).
2. Afmonter ledninger fra batteriers poler og fjern batterier (C) og sikringsholder (D). Vær opmærksom på at batteripolerne ikke kortsluttes mod stolens metaldele.
3. Monter de nye batterier. De sidder løst og bliver holdt fast, når afdækningerne (A) monteres igen.
4. Monter ledninger og sikringsholder (D). Vær særligt opmærksom på at montere rød ledning til plus på det ene batteri og sort ledning til minus på det andet batteri. Sikringen, der forbinder batterierne bagom stolen, er uafhængig af plus og minus.

Vigtigt: +/- poler skal vendes korrekt. Hvis det monteres omvendt ødelægges motorstyringen.



Batteri / Battery - VELA Tango 700

VELA Tango 700

NORSK

1. Fjern avdekninger (A) ved å fjerne o-ringer (B) og trekk de til siden.
2. Avmonter ledninger fra batteri poler og fjern batteriene (C) og sikringsholder (D). Vær oppmerksom på at batteri polene ikke kortsluttes mot stolens metalleder.
3. Monter nye batterier. De blir holdt på plass når avdekningene (A) monteres igjen.
4. Monter ledninger og sikringsholder (D). Vær spesielt oppmerksom på å montere rød ledning til pluss på det ene batteri og sort ledning til minus på det andre batteri. Sikringen som forbinder batteriene bak på stolen kan monteres på plus eller minus.

Viktig: +/- poler skal settes riktig vei. Hvis de monteres motsatt vei vil motorstyringen ødelegges.

SVENSKA

1. Ta bort skydden (A) genom att ta bort o-ringarna (B) och dra åt sidan. Använd vid behov en liten skruvmejsel för att ta bort o-ringarna (B).
2. Koppla loss kablarna från batteripolarna och ta bort batterierna (C) och säkringshållare (D). Var försiktig så att du inte kortsluter batteripolarna mot stolens metalleder.
3. Sätt i de nya batterierna. De lossas och hålls på plats när locken (A) återmonteras.
4. Fäst ledningar och säkringshållare (D). Var särskilt uppmärksam på att montera röd sladd på plus på ett batteri och svart sladd till minus på det andra batteriet. Säkringen som ansluter batterierna bakom stolen är oberoende av plus och minus.

Viktigt: +/- polerna måste vara korrekt orienterade. Motorstyrningen påverkas om den är inverterad.

ENGLISH

1. Remove the covers (A) by removing the o-rings (B) and pulling to the side. If necessary use a small screwdriver to remove the o-rings (B).
2. Disconnect cables from battery terminals and remove batteries (C) and fuse holder (D). Be careful not to short-circuit the battery terminals against the metal parts of the chair.
3. Install the new batteries. They are loosened and held when the covers (A) are reattached.
4. Attach the wires and fuse holder (D). Pay particular attention to mounting the red cord to plus on one battery and black cord to minus on the other battery. The fuse that connects the batteries behind the chair is independent of plus and minus.

Important: +/- poles must be correctly oriented. The motor control is damaged if it is installed inverted.