



Hofte-/sidesøtter / Hip-pads / Höftstöd

DANSK


Hofte-/sidesøtterne skal monteres på gangvognens øverste opstandere mellem de 2 rørstykker, der hver er låst fast med et skiftegreb.

Start med at løsne skruerne i rørskålene og del dem i to dele.

Monter de to rørskåle omkring opstanderne på gangvognen og spænd dem sammen med skruerne.

Hofte/sidesøtten kan vendes i forskellige retninger alt efter brugerens behov. Løsn håndskruen og tag den ud af beslaget for at vende den.

Hofte-/sidesøtten kan justeres ind og ud ved at løsne håndskruen. Efter tilpasning strammes håndskruen igen.

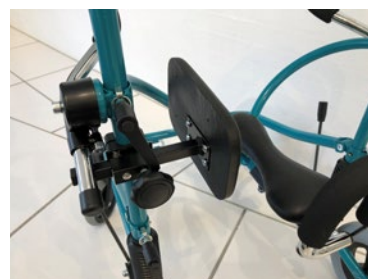



Hofte-/sidestøtter / Hip-pads / Höftstöd

ENGLISH

The hip pads are to be mounted on the vertical frame of the gait trainer between the two small pieces of pipe which each is locked to the frame with a spanner grip.

Start by loosening the screws in the two pipe sections and split them in two.

Mount the two pipe sections around the vertical frame of the gait trainer and tighten them together using the two screws.

The hip-/side pads can be positioned in different angels depending on the needs of the user. Loosen the hand screw to dismount the hip-/side pads to position it in a different angel.

The hip-/side pads can be adjusted in or out by loosening the thumbscrew. Tighten the thumbscrew again after adjustment.



SVENSKA

Höftstöden ska monteras på stolsstolparna.

Lossa på skruvarna i rörkopparna och dela upp dem i två delar.

Montera fast rörkopparna runt stolparna på stolen och dra åt dem med hjälp av med skruvarna.

Lossa på tumskraven och sätt fast höftstödet i fästet. Höftstödet kan vridas i olika riktningar utifrån brukarens behov.

Höftstöden kan justeras inåt och utåt genom att du lossar på tumskraven. Efter justeringen är det viktigt att du drar åt tumskraven ordentligt igen.

