




Vægbeslag / Veggbrakett / Væggefäste / Wall Bracket - VELA Person Lift

Montering af vægbeslag til VELA Person Lift

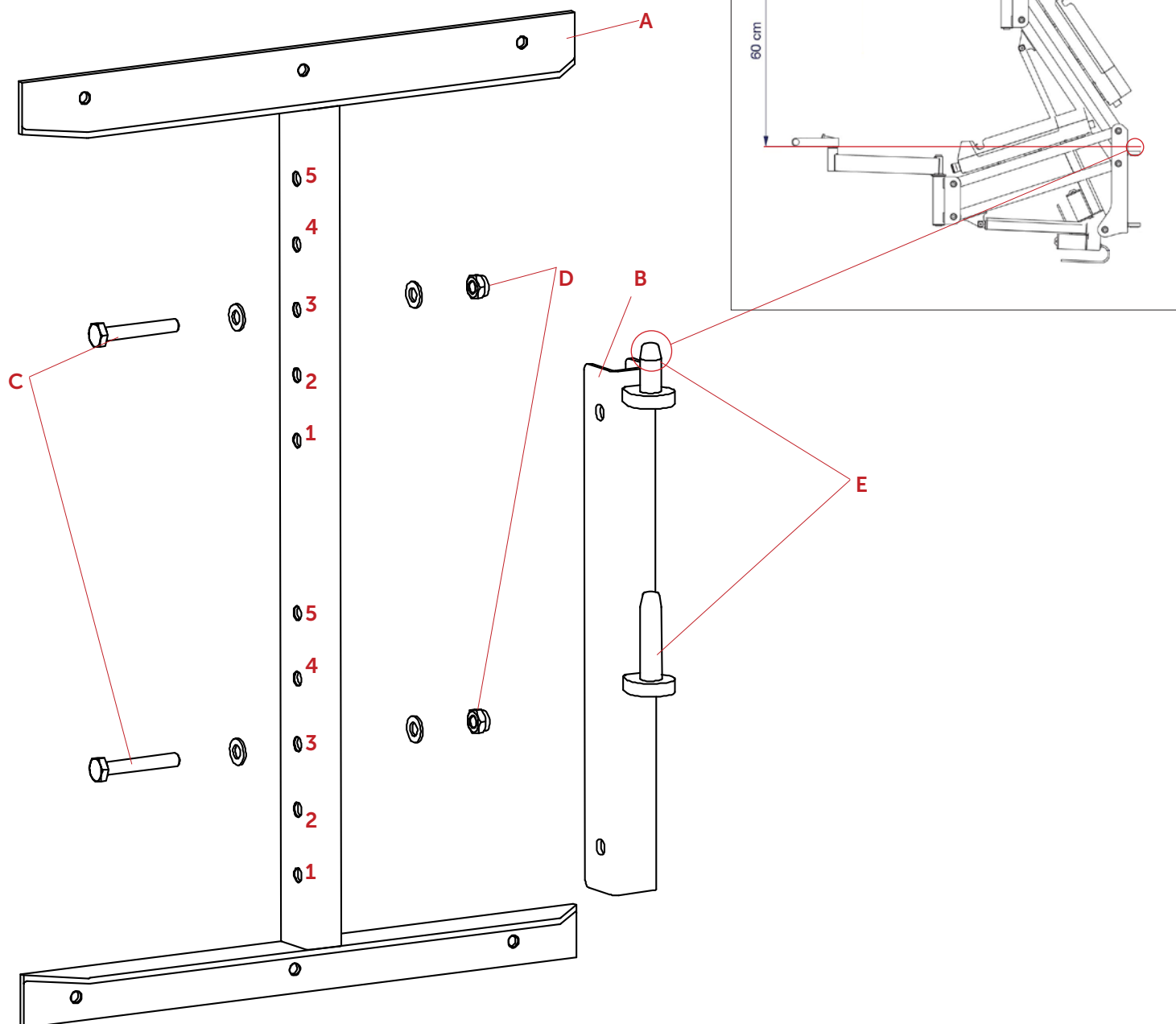

DANSK

1. Monter vægbeslaget (A) i en egnet væg med 6 ankre (medfølger ikke).
I laveste højde flugter VELA Person Lift med oversiden af det øvre hængsel (E) på U-profilet (B). Herfra kan VELA Person Lift hæves 60 cm. Dette kan være en rettesnor til at finde den optimale højde til brugerens behov.
2. Brug vægbeslaget som boreskabelon.
Krav til ankre; en trækraft på minimum 1000 N/stk.
3. Installer U-profilet (B) på vægbeslaget i ønsket højde (1, 2, 3, 4, 5).
4. Spænd fast med skruer (C) og møtrikker (D).
5. VELA Person Lift kan nu monteres på hængslerne (E).

OBS. Lav altid et prøveløft efter installation inden personløft udføres.



Vægbeslag / Veggbrakett / Væggefaste / Wall Bracket - VELA Person Lift

Montering af vægbeslag til VELA Person Lift

NORSK

1. Monter veggbraketten (A) på en egnet vegg med 6 ankere (følger ikke med).
I laveste høyde flukter VELA Person Lift med det øvre hengslet (E) på U-profilen (B). Herfra kan VELA Person Lift heves 60 cm. Dette kan være en rettesnor for å finne optimal høyde for brukerens behov.
2. Bruk veggbraketten som boresjablong.
Krav til ankere: en trekraft på minimum 1000 N/stk.
3. Installer U-profilen (B) på veggbraketten i ønsket høyde (1, 2, 3, 4, 5).
4. Fest med skruer (C) og muttere (D).
5. VELA Person Lift kan nå monteres på hengslene (E).

OBS. Utfør alltid en prøveløft etter installasjon før personløft utføres.

SVENSKA

1. Montera väggfästet (A) i en lämplig vägg med 6 ankare (ingår ej).
I lägsta höjd är VELA Person Lift i linje med det övre gångjärnet (E) på U-profilen (B). Härifrån kan VELA Person Lift höjas 60 cm. Detta kan vara en riktlinje för att hitta optimal höjd för användarens behov.
2. Använd väggfästet som bormall.
Krav på ankare: en draghållfasthet på minst 1000 N/st.
3. Montera U-profilen (B) på väggfästet på önskad höjd (1, 2, 3, 4, 5).
4. Fäst med skruvar (C) och muttrar (D).
5. VELA Person Lift kan nu monteras på gångjärnen (E).

OBS. Gör alltid ett provlyft efter installation innan personlyft utförs.

ENGLISH

1. Mount the wall bracket (A) on a suitable wall using 6 anchors (not included).
At its lowest height, the VELA Person Lift aligns with the upper hinge (E) on the U-profile (B). From this position, the VELA Person Lift can be raised by 60 cm. This can serve as a guideline for finding the optimal height for the user's needs.
2. Use the wall bracket as a drilling template.
Anchor requirement: tensile strength of at least 1000 N each.
3. Install the U-profile (B) on the wall bracket at the desired height (1, 2, 3, 4, 5).
4. Secure with screws (C) and nuts (D).
5. The VELA Person Lift can now be mounted on the hinges (E).

NOTE: Always perform a test lift after installation before lifting a person.