



www.vermundlarsen.no

VELA arbeidsstoler og ståstoler

Ergonomiske stoler og tilbehør
for junior, voksne og høy vekt

Komfort, sikkerhet og ergonomi i fokus

VELA stoler er utviklet for mennesker med behov for stabile og trygge sittestillinger, så aktivitetsnivå og selvhjulpenhet kan bevares. Brukere av stolene kan ha funksjonsnedsettelse og begrenset mobilitet. VELA stoler bidrar til å gjøre en aktiv hverdag lettere.





Stoler på avtale

VELA Tango 700ELF Aktiv
Delkontrakt 3



Side 10

VELA Tango 700EL Aktiv
Delkontrakt 3



Side 13

VELA Tango 700EL Contour/Support
Delkontrakt 4



Side 14

VELA Tango 700F Aktiv
Delkontrakt 1



Side 16

VELA Tango 700 Aktiv
Delkontrakt 1



Side 19

VELA Tango 700 Contour/Support
Delkontrakt 2



Side 20

VELA Tango 300/310ELF Aktiv Ekstra Stor
Delkontrakt 5



Side 22

VELA Salsa Ståstoler
Delkontrakt 7



Side 25

VELA Tango 600EL Aktiv Junior
Delkontrakt 10



Side 26

Les mer om:

Slik fungerer en
VELA-stol

Side 4

Nye VELA-stoler
på avtale

Side 6

Nye seter & rygger

Side 8

Tilbehørslist

Side 28



Slik fungerer en VELA-stol

VELA Tango 700EL

Arbeidsstol - Voksen



Se produktark [Side 10-21](#)

VELA Salsa 120

Ståstol - Voksen



Se produktark [Side 25](#)



Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i



VL1935.dk/finnstol



Nye VELA-stoler på avtale

Opp till 300 kg

NY
PÅ AVTALE

VELA Tango 300ELF

Arbeidsstol - opptil 200kg

VELA Tango 310ELF

Arbeidsstol - opptil 300kg

FORSTERKET RYGGBØYLE, SOM
KAN LÅSES I EN FAST VINKEL FOR
OPTIMAL STØTTE

STABIL STØTTE FRA SETE
OG RYGG FOR EN GOD
SITTEKOMFORT

STABILE OG ROBUSTE ARMLENER ER
TIL HJELP NÅR BRUKER REISER SEG
OG SETTER SEG NED BRUKER KAN
SKYVE FRA PÅ ARMLENET MED FULL
VEKT

STORE KNAPPER FOR ELEKTRISK
HØYDEJUSTERING, SOM ER
TYDELIG MERKET OG ENKLE Å NÅ
FOR BRUKER

ROBUST OG SIKKER STOL UTVIKLET
TIL VELDIG HØY BRUKERVEKT

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR BRUKER STOR MOBILITET
OG MULIGHET TIL Å KOMME SEG
RUNDT SITTEDE I STOLEN



Se produktark

Side 22





Nye VELA-stoler på avtale

Arbeidsstol
for junior
NY
PÅ AVTALE

VELA Tango 600EL

Arbeidsstol - Junior

MULIGHET FOR Å VELGE ULIKE SETER
OG RYGGER FOR Å OPPNÅ OPTIMAL
SITTEKOMFORT FOR BRUKEREN

SETETILT OG RYGGVINKEL GIR GOD
MULIGHET FOR EN VARIERT OG AKTIV
SITTESTILLING

RYGGBØYLE, SOM KAN LÅSES I EN
FAST VINKEL FOR OPTIMAL STØTTE

ARMLENER GIR GOD STØTTE NÅR
BRUKER SITTER I STOLEN, ELLER
NÅR BRUKER SKAL REISE SEG OG
SETTE SEG MED MINIMUM AV HJELP

STORE HÅNDTAK SOM ER TYDELIG
MERKET OG ENKLE Å NÅ FOR BRUKER
OG HJELPER

JUSTERBAR FOTPLATE GIR
MULIGHETER FOR HENSIKTSMESSIG
OG TRYGG PLASSERING AV FØTTENE

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR MOBILITET OG MULIGHET
TIL Å FLYTTE PÅ STOLEN MED
BRUKEREN SITTEDE



Se produktark

Side 26





Nye seter & rygger

VELA Tango 700-serien tar ergonomisk sittekomfort i aktive arbeidsstoler til et nytt nivå.

Velg mellom to serier av seter og ryggstøtter: "Aktiv" og "Contour". Begge seriene fås i størrelsene liten, medium og stor; hvor setets oppbygning og støtte er tilpasset brukers høyde og vekt. Begge setetyper har avrundet forkant slik at man kan bevege seg rundt ved å "gå" stolen frem.

Aktiv-serien:

Standard sete for den aktive personen med normalt sittebehov:

- ✓ **Aktivitet og økt behov for å sitte**
Rettes mot den aktive brukeren som ønsker en balanse mellom komfort og lett støtte.
- ✓ **Laget for mennesker i bevegelse**
Med sine runde former og omfavnende fasong utgjør Aktiv-setet en solid base for både kortvarig og langvarig stabil sittestilling for mennesker i bevegelse.
- ✓ **Neste stilling er den beste**
Setet og ryggstøtten gir lett og fleksibel støtte, noe som er ideelt for brukere som beveger seg fritt og kan endre sin sittestilling selv.
- ✓ **Stabil støtte med fri bevegelse**
Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både under hvile og aktivitet, samtidig som den gir bevegelsesfrihet for skuldre og armer.

Contour-serien:

Avansert sete med ekstra støtte og avlastning:


- ✓ **Økt støtte og komfort**
Dette gir økt støtte og komfort til brukere som trenger støtte, avlastning og mykere sittestøtte.
- ✓ **Fantastisk trykkfordeling**
Setet er sammensatt av ulike skumtyper som støtter og fordeler vekten, slik at risikoen for uheldig trykk i seteregionen nær sittekroker og haleben reduseres.
- ✓ **Lindrer trykk, smerter og ubehag**
De skrånende kantene og fordypningene i setet hjelper med å lindre trykk, smerter og ubehag. Dette er en fordel hvis man tilbringer mye tid i sittende stilling.
- ✓ **Ekstra støtte i rygg**
Ryggstøtten har kiler i sidene som gir optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og midjen, uten å gå på kompromiss med rygglenets komfort og mykhet.





Hvilken størrelse bør jeg velge?

Vi har utarbeidet denne enkle størrelsesguiden, som kan hjelpe når du skal velge setestørrelse for den enkelte bruker.

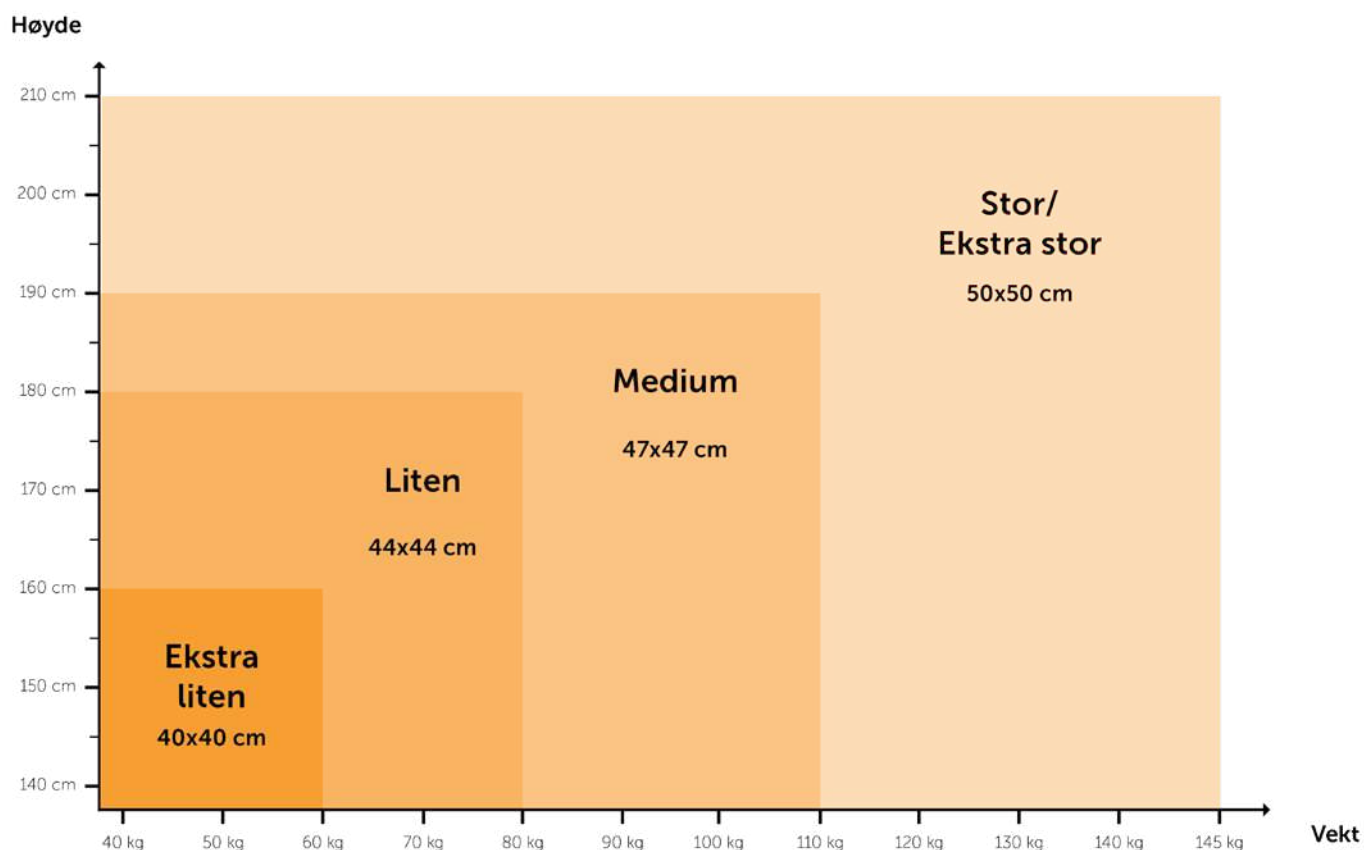

Merk: Hvis bruker er betydelig bredere enn sin høyde, kan det være nødvendig å velge en større størrelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du er usikker på hva du skal velge.

Se alle våre seter og rygger med HMS art.nr og mål i tilbehørskataloget fra side 28.



Visste du at: VELA Tango 700-serien er designet slik at setene kan byttes uten bruk av verktøy.



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Uten
seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700ELF Aktiv Liten

VELA Tango 700ELF Aktiv Medium

VELA Tango 700ELF Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3
VELA Art. nr.	J71011-10	J71011-11	J71011-12
HMS Art. nr.	323913	323914	323915
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm(Aktiv Liten) (HMS.nr: 323732)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. **Merk:** laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36

NYHET: Fremdriftshjelp

Fremdriftshjelpen er en assistansemotor som hjelper brukeren med å opprettholde sin mobilitet på en trygg måte når kreftene begynner å avta.





Med elektrisk seteløft øker brukerens rekkevidde og gjør det mulig å nå høyt uten unødig bruk av krefter.



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
Seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700EL Aktiv Liten

VELA Tango 700EL Aktiv Medium

VELA Tango 700EL Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3
VELA Art. nr.	J71011-13	J71011-14	J71011-15
HMS Art. nr.	323906	323907	323908
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i beina til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

**Aktiv rygg - ALB**

Optimal støtte til korsrygg og bekken, som støtter korsryggens naturlige krumning og fremmer en god holdning.

Side 31



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700EL Contour Medium



VELA Tango 700EL Contour Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 4	Delkontrakt 4
VELA Art. nr.	J71011-16	J71011-17
HMS Art. nr.	323909	323910
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	42x44cm (Contour Medium)	44x51cm (Contour Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. **Merk:** laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700EL Support Medium



VELA Tango 700EL Support Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 4	Delkontrakt 4
VELA Art. nr.	J71011-18	J71011-19
HMS Art. nr.	323911	323912
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	44x44cm (Support)	44x44cm (Support)
Indre mål (bredde)	opp til 28cm	opp til 28cm
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenhøyde fra settepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i bena til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

**Kjørebøyle**

Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 36



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

 Uten
seterotasjon


Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700F Aktiv Liten

VELA Tango 700F Aktiv Medium

VELA Tango 700F Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1
VELA Art. nr.	J71001-10	J71001-11	J71001-12
HMS Art. nr.	323916	323917	323918
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påklledning.

Side 33

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36




Få støtte ved utstigning med elektrisk seteløft

Det kan være både utrygt og utmattende å reise seg opp...
- men da kan elektrisk seteløft være til hjelp.

- ✓ Brukeren kan føle seg trygg, da seteløftet går langsomt og trinnløst uten støt eller raske bevegelser.
- ✓ Ingen unødig bruk av krefter for å reise seg opp (energibesparende).
- ✓ God sikkerhet med sentralbrems og støtte fra armlener.



vl1935.dk/reise

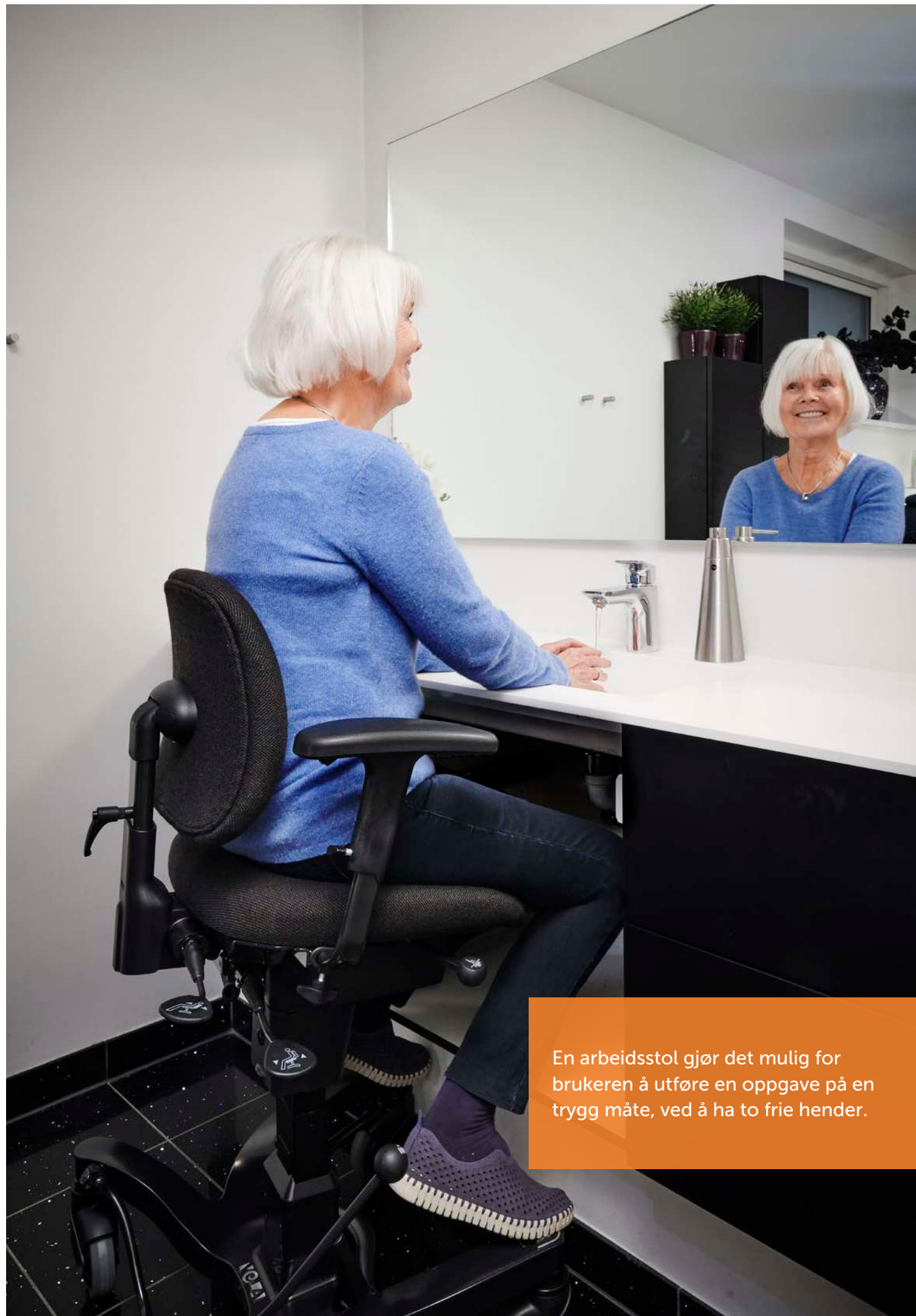

En arbeidsstol gjør det mulig for brukeren å utføre en oppgave på en trygg måte, ved å ha to frie hender.



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
Seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700 Aktiv Liten

VELA Tango 700 Aktiv Medium

VELA Tango 700 Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1
VELA Art. nr.	J71001-13	J71001-14	J71001-15
HMS Art. nr.	323899	323900	323901
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



VL1935.dk/finnstol



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Contour Medium



VELA Tango 700 Contour Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 2	Delkontrakt 2
VELA Art. nr.	J71001-16	J71001-17
HMS Art. nr.	323902	323903
Seteløft	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	42x44cm (Contour Medium)	44x51cm (Contour Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.


VL1935.dk/finnstol



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Support Medium



VELA Tango 700 Support Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 2	Delkontrakt 2
VELA Art. nr.	J71001-18	J71001-19
HMS Art. nr.	323904	323905
Seteløft	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	44x44cm (Support)	44x44cm (Support)
Indre mål (bredde)	opp til 28cm	opp til 28cm
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påkledning.

Side 33

**Setetrek**

God beskyttelse mod slitasje, fuktighet og smuss. Overtrekket kan tas av og vaskes i vaskemaskin.

Side 29



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Høy vekt



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 300ELF Aktiv Ekstra Stor

VELA Tango 310ELF Aktiv Ekstra Stor HD

Delkontraktnr.	Delkontrakt 5	Delkontrakt 5
VELA Art. nr.	J5105-10	J5106-10
HMS Art. nr.	323894	323895
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (15cm)	44-59cm	44-59cm
Setepute (bredde x dybde)	61x52cm (XXX-sete)	73x51cm (4XL-sete)
Setedybde (min-max)	46-56cm	46-56cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x43cm (CX-rygg)	41x43cm (CX-rygg)
Tilt sitteenhet	Nei	Nei
Seterotasjon	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	7x35cm	7x35cm
Armlenehøyde fra settepute, justerbar	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Største utvendige bredde	68cm	84cm
Maks belastning	200kg	300kg

**Bremsepedal**


Bremsepedalen kan brukes som alternativ for bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

Side 38

**Kjørebøyle**

Kjørebøyle gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen.

Side 38

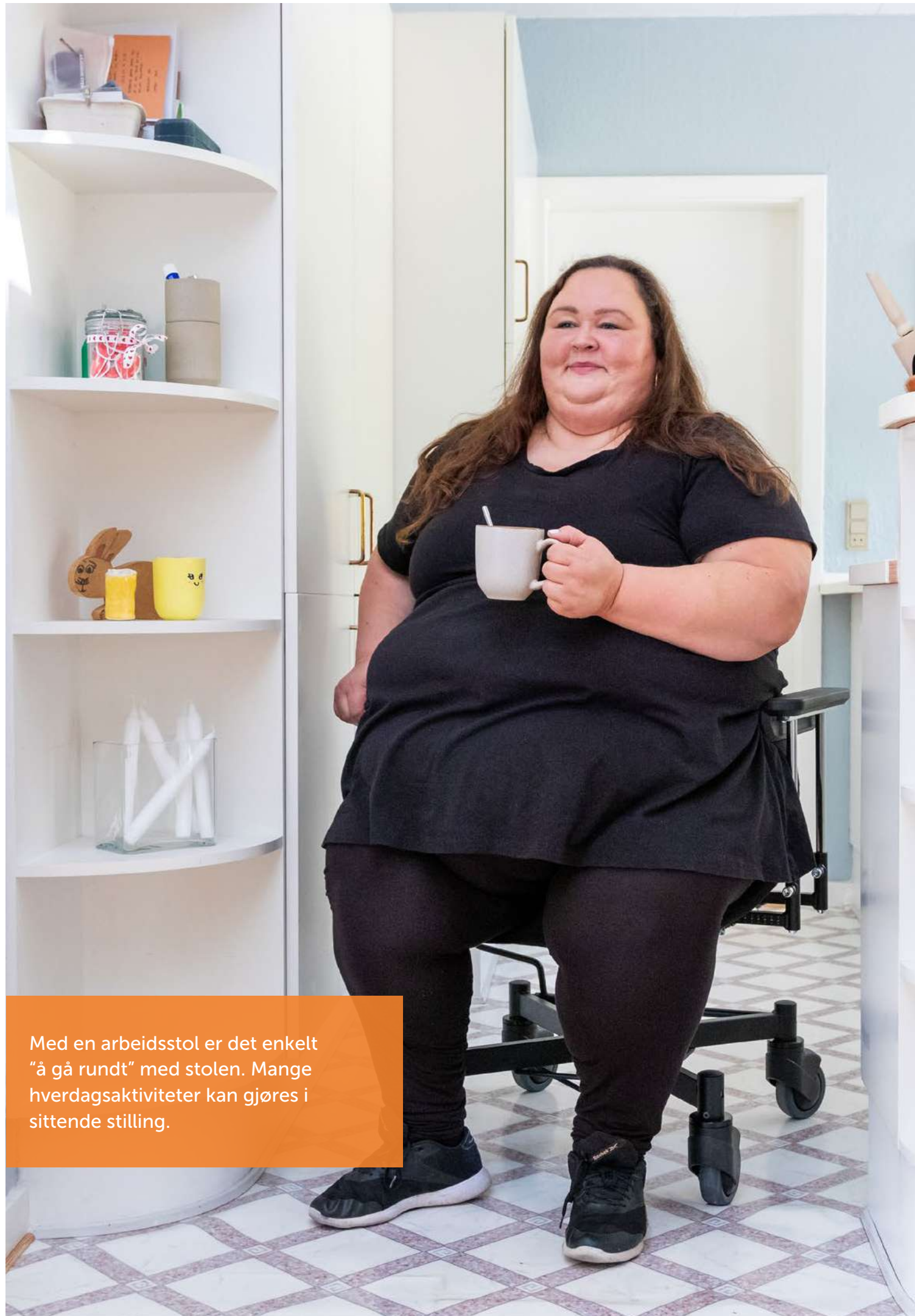

Med en arbeidsstol er det enkelt "å gå rundt" med stolen. Mange hverdagsaktiviteter kan gjøres i sittende stilling.



Med elektrisk seteløft behøver ikke brukeren å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Ståstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon
og
sentralbrems



Spesifikasjoner for:

VELA Salsa 100 sete avrundet front

VELA Salsa 120 sykkelsete

VELA Salsa 400 ridesadelsete

Delkontraktnr.	Delkontrakt 7	Delkontrakt 7	Delkontrakt 7
VELA Art. nr.	J4113-10	J4112-10	J4130-10
HMS Art. nr.	323919	323920	323921
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	58-84cm	57-83cm	59-85cm
Intervalregulering (6 trin)	50-86cm	49-85cm	51-87cm
Setepute (bredde x dybde)	46x35cm (Sete avrundet front)	40x35cm (Sykkelsete)	42x34cm (Ridesadelsete)
Setedybde (min-max)	28-35cm	28-35cm	28-35cm
Ryggpute (bredde x høyde)	38x23cm (Ergo-rygg)	38x23cm (Ergo-rygg)	38x23cm (Ergo-rygg)
Tilt sitteenhet	7° forover, 7° bakover	7° forover, 7° bakover	7° forover, 7° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	8x26cm	8x26cm	8x26cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	0-24cm	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	125kg	125kg	125kg

Alle tre VELA Salsa-modellene har korte seter, slik at du enkelt kan komme tett inntil aktivitetene som skal utføres.



Vi anbefaler **VELA Salsa 100** for brukere som trenger lett støtte i stående stilling, og god støtte i sittende stilling.



Vi anbefaler **VELA Salsa 120** for brukere som ønsker mest mulig støtte i setet ved åpen hoftevinkel



Vi anbefaler **VELA Salsa 400** for brukere som ønsker en åpen hoftevinkel med føttene i god avstand fra hverandre.



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Junior



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Liten

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Medium

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 10	Delkontrakt 10	Delkontrakt 10
VELA Art. nr.	J61013-10	J61013-11	J61013-12
HMS Art. nr.	323896	323897	323898
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Intervalregulering (5 trin)	40-63cm	40-63cm	40-63cm
Setepute (bredde x dybde)	32x36cm (E2-sete)	38x42cm (E3-sete)	41x47cm (E4-sete)
Setedybde (min-max)	30-35cm	35-43cm	39-49cm
Ryggpute (bredde x høyde)	28x28cm (E2-rygg)	30x36cm (E3-rygg)	38x30cm (Aktiv liten-rygg)
Tilt sitteenhet	3° forover, 9° bakover	3° forover, 9° bakover	3° forover, 9° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x25cm	9x25cm	9x25cm
Armlenehøyde fra settepute, justerbar	0-24cm	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	80kg	80kg	80kg

**Kjørebøyle**

Kjørebøylen gir hjelpen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 46

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 47



Med elektrisk seteløft behøver ikke junior å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Sete

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv dyp b40xd49cm, grå	J771177920693	323731
Sete Aktiv ekstra liten b40xd40cm, grå	J773217920693	323729
Sete Aktiv liten b44xd44cm, grå*	J773227920693	323732
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå*	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå*	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for mennesker i aktivitet. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate. Farge: grå

Velg Aktiv-setet:

Hvis du har gangfunksjon, men opplever tretthet, ubehag eller smerte ved langvarig stående.

Hvis du har balansevansker

Hvis du foretrekker å utføre daglige aktiviteter sittende.

Setet kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Sete Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Contour liten b44xd44cm, grå	J774227959693	323733
Sete Contour medium b47xd47cm, grå*	J774237959693	323735
Sete Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, grå*	J774247959693	323738

Setet er designet for brukere med et stort behov for å sitte i mange timer daglig, og derfor trenger mer avlastning. Setet kompenserer for fysiologiske forhold som kan oppstå ved langvarig sittestilling, slik som trykk, smerter og ubehag. Midten av setet utgjør et basseng med kaldskum Pantera, en mykere skum med høy tetthet. Kantene på bassenget er skrå og sikrer jevn vektfordeling. Formålet med bassenget er å avlaste sitteknoklene bilateralt.

Bak på setet er det utformet en liten fordybning i halebensområdet. Denne fordybningen gir en trykkavlastende effekt som lindrer eventuelle ubehag i dette området når man sitter. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben. Farge: grå

Velg Contour-setet:

Hvis du har et stort behov for å sitte.

Hvis du ønsker å forebygge uhensiktsmessig trykk i seteregionen, nær sitteknokler og haleben i sittende stilling.

Hvis du ønsker en høyere grad av mykhet i setet.

Kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Contour & Support sitteenhet**

Sete Coxit



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete coxit liten b40xd47cm, grå	J929364	323730
Sete coxit stor b47xd47cm, grå	J929369	323736

Sittedelen kan justeres og tilpasses den enkelte bruker og situasjonen.

Klaffene kan justeres individuelt og gir mulighet for å sitte med åpen hoftevinkel, noe som er en fordel for brukere med for eksempel nedsatt bevegelighet i hoftene, samt brukere som har stive ben eller er benamputerte. Farge: grå
Kan byttes uten bruk av verktøy.

Plansete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten b40xd48cm	J771407911052	323660
Medium b45xd48cm	J771417911052	323661
Stor b50xd48cm	J771427911052	323662

Plansete for bruk av annen pute. Farge: svart.
Kan byttes uten bruk av verktøy.



Trekk & skruer

Setetrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinenstrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Aktiv dyp b40xd-49cm	J46T1117521	323768		inko Aktiv dyp b40xd49cm	J46T4117571	323746
	Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T1321521	323767		inko Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T4321571	323745
	Aktiv liten b44xd-44cm	J46T1322521	323769		inko Aktiv liten b44xd44cm	J46T4322571	323747
	Aktiv medium b47xd47cm	J46T1323521	323771		inko Aktiv medium b47xd47cm	J46T4323571	323750
	Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T1324521	323773		inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50	J46T4324571	323752

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Setetrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinenstrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Setetrekk Contour liten b44xd44cm	J46T2422521	323770		inko Contour liten b44xd-44cm	J46T5422571	323748
	Setetrekk Contour medium b47xd47cm	J46T2423521	323772		inko Contour medium b47xd47cm	J46T5423571	323749
	Setetrekk Contour stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T2424521	323774		inko Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, sort	J46T5424571	323751

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Montering av sete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Mont sett f avtagelig sete	J102015	323638

4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.



Elektrisk tilt

Se mulighet for elektrisk tilt her:



Rygg

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv ekstra liten b38xh22cm, grå	J08A15120693	323683
Rygg Aktiv liten b38xh30cm, grå*	J08A25120693	323684
Rygg Aktiv medium b40xh40cm, grå*	J08A35120693	323686
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm, grå*	J08A45120693	323687
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsval. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal stilling for utførelsen av aktiviteter.

Farge: grå

Velg Aktiv-ryggstøtte hvis du trenger ryggstøtte, men ikke ønsker å begrense den sittende mobiliteten.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Rygg Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Contour liten b36xh38cm, grå	J08B25122693	323682
Rygg Contour medium b39xh43cm, grå*	J08B35122693	323685
Rygg Contour stor/ekstra stor b41xh48cm, grå*	J08B45122693	323690

Denne ryggstøtten er laget for sittende aktivitet, hvor det er behov for støtte for å stabilisere kroppen og opprettholde den posturale kontrollen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsval. Den er fullstøpt i skum med sideputer, som har til hensikt å sikre optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og livet. Ved brysthøyde avtar sideputen for å gi bevegelsesfrihet rundt skulderleddene og armene. Ryggstøtten stabiliserer uten å fiksere. Farge: grå

Velg Contour-ryggstøtte:

Hvis du har et stort behov for ryggstøtte i sittende stilling.

Hvis du har tendens til å falle over til en av sidene

Hvis du opplever tretthet i ryggmuskulaturen.

Hvis du opplever stabilitets- og balanseproblemer.

***Standard på stoler med Contour sitteenhet**

Rygg Support



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm, grå*	J08255111693	323692
Rygg Support stor m luftpute b43xh46cm, grå	J08335158693	323691

Support-ryggstøtten er godt polstret og har innebygde sidestøtter. De innebygde sidestøtter støtter fra hoften og opp til under armhulen, og gir støtte i sittestillingen samtidig som de veileder brukeren til midtlinjen. Support-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å gi mest mulig støtte i sittestillingen. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å opprettholde oppreist stilling eller blir trett i løpet av dagen. Du må måle brukerens ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til den indre ryggbredde på Support-ryggstøtten (maks. 28 cm). Farge: grå

***Standard på stoler med Support sitteenhet**



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg ALB



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm hø betj, grå	J08U27612693	323667
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm ve betj, grå	J08U37612693	323668
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm hø betj, grå	J08U47612693	323669
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm ve betj, grå	J08U57612693	323670
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm hø betj, grå	J08U67612693	323671
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm ve betj, grå	J08U77612693	323672

ALB-ryggstøtten er en unik ryggstøtte med todelt støtte for rygg og korsrygg. Ryggstøtten gir optimal støtte for korsryggen og bekkenet, støtter den naturlige korsryggsvaien og fremmer en oppreist holdning, noe som kan bidra til å forebygge eller lindre ryggsmarter. Korsryggstøtten kan enkelt justeres frem og tilbake trinnløst via et grep, noe som gir mulighet for variasjon og støtte i korsryggen. Øvre del av ryggen beholder derimot sin vinkel i forhold til setet, slik at brukeren også sikres støtte i den øvre delen av ryggen. Tilgjengelig i tre størrelser. Farge: grå

Planrygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Planrygg m hook velcro b40xh48cm	J08V15160693	323689

Planrygg for bruk af annen pute. Farge: grå.

Ryggbøyle, komplett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
lengde 24cm	J929068	323705
lengde 31cm	J929069	323707
lengde 24cm m vinkel	J929070	323706
Ryggstang ALB	J929071	323708

Ryggbøyle komplett med monteringskit.

Nakkestøtte

J413105391



J4131E1591

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b25xh12cm	J413103167	323654
stor b26xh-13cm	J413105391	323655
liten m fleksibel pute h8cm	J4131E1591	323656

Nakkestøtte i svart skinn.



Elektrisk ryggvinkel

Se mulighet for elektrisk ryggvinkel her:

Side 37



Armlen

Armlen 9x30cm 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre*</td><td>J1026304003</td><td>323411</td></tr><tr><td>Lav, venstre*</td><td>J1116304003</td><td>323413</td></tr><tr><td>Høy, høyre**</td><td>J1026404003</td><td>323415</td></tr><tr><td>Høy, venstre**</td><td>J1116404003</td><td>323417</td></tr></table> Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre*	J1026304003	323411	Lav, venstre*	J1116304003	323413	Høy, høyre**	J1026404003	323415	Høy, venstre**	J1116404003	323417	Armlen 9x30cm for elbetjening 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre*</td><td>J1026305003</td><td>323438</td></tr><tr><td>Lav, venstre*</td><td>J1116305003</td><td>323441</td></tr><tr><td>Høy, høyre**</td><td>J1026405003</td><td>323444</td></tr><tr><td>Høy, venstre**</td><td>J1116405003</td><td>323448</td></tr></table> For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre*	J1026305003	323438	Lav, venstre*	J1116305003	323441	Høy, høyre**	J1026405003	323444	Høy, venstre**	J1116405003	323448
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre*	J1026304003	323411																															
Lav, venstre*	J1116304003	323413																															
Høy, høyre**	J1026404003	323415																															
Høy, venstre**	J1116404003	323417																															
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre*	J1026305003	323438																															
Lav, venstre*	J1116305003	323441																															
Høy, høyre**	J1026405003	323444																															
Høy, venstre**	J1116405003	323448																															
Standard på manuelle stoler. * Aktiv / **Contour & Support		Standard på stoler med el. * Aktiv / **Contour & Support																															
Armlen 9x25cm 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026335003</td><td>323403</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116335003</td><td>323405</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026435003</td><td>323407</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116435003</td><td>323409</td></tr></table> Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026335003	323403	Lav, venstre	J1116335003	323405	Høy, høyre	J1026435003	323407	Høy, venstre	J1116435003	323409	Armlen 9x25cm for elbetjening 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026334003</td><td>323420</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116334003</td><td>323424</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026434003</td><td>323430</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116434003</td><td>323433</td></tr></table> Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026334003	323420	Lav, venstre	J1116334003	323424	Høy, høyre	J1026434003	323430	Høy, venstre	J1116434003	323433
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026335003	323403																															
Lav, venstre	J1116335003	323405																															
Høy, høyre	J1026435003	323407																															
Høy, venstre	J1116435003	323409																															
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026334003	323420																															
Lav, venstre	J1116334003	323424																															
Høy, høyre	J1026434003	323430																															
Høy, venstre	J1116434003	323433																															
Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026359003</td><td>323421</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116359003</td><td>323425</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026459003</td><td>323429</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116459003</td><td>323434</td></tr></table> For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026359003	323421	Lav, venstre	J1116359003	323425	Høy, høyre	J1026459003	323429	Høy, venstre	J1116459003	323434	Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026360003</td><td>323437</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116360003</td><td>323440</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026460003</td><td>323443</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116460003</td><td>323447</td></tr></table> For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026360003	323437	Lav, venstre	J1116360003	323440	Høy, høyre	J1026460003	323443	Høy, venstre	J1116460003	323447
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026359003	323421																															
Lav, venstre	J1116359003	323425																															
Høy, høyre	J1026459003	323429																															
Høy, venstre	J1116459003	323434																															
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026360003	323437																															
Lav, venstre	J1116360003	323440																															
Høy, høyre	J1026460003	323443																															
Høy, venstre	J1116460003	323447																															
Armlen 10x32cm Combi 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026329167</td><td>323384</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116329167</td><td>323385</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026429167</td><td>323386</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116429167</td><td>323387</td></tr></table> Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026329167	323384	Lav, venstre	J1116329167	323385	Høy, høyre	J1026429167	323386	Høy, venstre	J1116429167	323387	Armlen 10x37m Combi 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026326167</td><td>323388</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116326167</td><td>323389</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026426167</td><td>323419</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116426167</td><td>323390</td></tr></table> Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026326167	323388	Lav, venstre	J1116326167	323389	Høy, høyre	J1026426167	323419	Høy, venstre	J1116426167	323390
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026329167	323384																															
Lav, venstre	J1116329167	323385																															
Høy, høyre	J1026429167	323386																															
Høy, venstre	J1116429167	323387																															
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026326167	323388																															
Lav, venstre	J1116326167	323389																															
Høy, høyre	J1026426167	323419																															
Høy, venstre	J1116426167	323390																															
Armlen 8x26cm 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Lav, høyre</td><td>J1026331003</td><td>323395</td></tr><tr><td>Lav, venstre</td><td>J1116331003</td><td>323397</td></tr><tr><td>Høy, høyre</td><td>J1026431003</td><td>323399</td></tr><tr><td>Høy, venstre</td><td>J1116431003</td><td>323401</td></tr></table> Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Lav, høyre	J1026331003	323395	Lav, venstre	J1116331003	323397	Høy, høyre	J1026431003	323399	Høy, venstre	J1116431003	323401	Håndskruer 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>M8x20mm</td><td>J928606</td><td>323940</td></tr></table> Vingskruer M8x20mm for armlenehøyde og -bredde.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	M8x20mm	J928606	323940									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
Lav, høyre	J1026331003	323395																															
Lav, venstre	J1116331003	323397																															
Høy, høyre	J1026431003	323399																															
Høy, venstre	J1116431003	323401																															
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																															
M8x20mm	J928606	323940																															



Armlen

Armlen, nedfellbar 9x30cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026604003	323412
Lav, venstre	J1116604003	323414
Høy, høyre	J1026704003	323416
Høy, venstre	J1116704003	323418

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026605003	323439
Lav, venstre	J1116605003	323442
Høy, høyre	J1026705003	323446
Høy, venstre	J1116705003	323450

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026635003	323404
Lav, venstre	J1116635003	323406
Høy, høyre	J1026735003	323408
Høy, venstre	J1116735003	323410

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026634003	323422
Lav, venstre	J1116634003	323426
Høy, høyre	J1026734003	323431
Høy, venstre	J1116734003	323435

Kortere nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026659003	323423
Lav, venstre	J1116659003	323427
Høy, høyre	J1026759003	323432
Høy, venstre	J1116759003	323436

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026660003	I/A
Lav, venstre	J1116660003	323428
Høy, høyre	J1026760003	323445
Høy, venstre	J1116760003	323449

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 8x26cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026631003	323396
Lav, venstre	J1116631003	323398
Høy, høyre	J1026731003	323400
Høy, venstre	J1116731003	323402

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, traub 10x42cm skålformet Combiarmlen



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026328167	323391
Lav, venstre	J1116328167	323392
Høy, høyre	J1026428167	323393
Høy, venstre	J1116428167	323394

Ett polstret armlen som gir støtte for underarmen/albu. En fordel for brukere med behov for at armstøtten holder armen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, hemiplegi 13x44cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	J1026558167	323451
Venstre side	J1116558167	323452

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleledd gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.



Holder for håndkontroll

Se holder for håndkontroll til montering på armlen her:



Sele, kroppsstøtte & sidestøtte

Hoftesele Y-sele 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten br2,5xl127cm</td><td>J929010</td><td>323497</td></tr> <tr> <td>medium br4xl140cm</td><td>J929011</td><td>323500</td></tr> <tr> <td>stor br4xl175cm</td><td>J929012</td><td>323503</td></tr> </tbody> </table> En 4-punkts hoftesele med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	liten br2,5xl127cm	J929010	323497	medium br4xl140cm	J929011	323500	stor br4xl175cm	J929012	323503	Hoftesele Pelvi  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>xtra liten br2,5xl120cm</td><td>J929013</td><td>323504</td></tr> <tr> <td>liten br4xl200cm</td><td>J929014</td><td>323496</td></tr> <tr> <td>medium br4xl205cm</td><td>J929015</td><td>323499</td></tr> <tr> <td>stor br4xl205cm</td><td>J929016</td><td>323502</td></tr> </tbody> </table> Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren sklir frem i setet. Med monteringskit	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	xtra liten br2,5xl120cm	J929013	323504	liten br4xl200cm	J929014	323496	medium br4xl205cm	J929015	323499	stor br4xl205cm	J929016	323502
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
liten br2,5xl127cm	J929010	323497																											
medium br4xl140cm	J929011	323500																											
stor br4xl175cm	J929012	323503																											
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
xtra liten br2,5xl120cm	J929013	323504																											
liten br4xl200cm	J929014	323496																											
medium br4xl205cm	J929015	323499																											
stor br4xl205cm	J929016	323502																											
Brystsele H-sele Sternum 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten l120cm</td><td>J929017</td><td>323495</td></tr> <tr> <td>medium l135cm</td><td>J929018</td><td>323498</td></tr> <tr> <td>stor l153cm</td><td>J929019</td><td>323501</td></tr> </tbody> </table> Brystsele Sternum med monteringskit.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	liten l120cm	J929017	323495	medium l135cm	J929018	323498	stor l153cm	J929019	323501	Beskyttelseskappe f. Y-sele  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Svart, 55x25x65 mm</td><td>J923615</td><td>323633</td></tr> </tbody> </table> Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet åpning av selen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
liten l120cm	J929017	323495																											
medium l135cm	J929018	323498																											
stor l153cm	J929019	323501																											
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633																											
Sidestøtte buet pute 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten sett, stenger 19,5cm</td><td>J929020</td><td>323811</td></tr> <tr> <td>liten sett, stenger 22,5cm</td><td>J929046</td><td>323814</td></tr> <tr> <td>stor sett, stenger 19,5cm</td><td>J929021</td><td>323812</td></tr> <tr> <td>stor sett, stenger 22,5cm</td><td>J929047</td><td>323815</td></tr> </tbody> </table> Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Regulerbar i høyde, dybde og bredde. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. Merk: Husk monteringssett!	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	liten sett, stenger 19,5cm	J929020	323811	liten sett, stenger 22,5cm	J929046	323814	stor sett, stenger 19,5cm	J929021	323812	stor sett, stenger 22,5cm	J929047	323815	Sidestøtte rett pute  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rett pute sett, stenger 19,5cm</td><td>J929022</td><td>323813</td></tr> <tr> <td>rett pute sett, stenger 22,5cm</td><td>J929048</td><td>323816</td></tr> </tbody> </table> Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. Merk: Husk monteringssett!	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	rett pute sett, stenger 19,5cm	J929022	323813	rett pute sett, stenger 22,5cm	J929048	323816			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
liten sett, stenger 19,5cm	J929020	323811																											
liten sett, stenger 22,5cm	J929046	323814																											
stor sett, stenger 19,5cm	J929021	323812																											
stor sett, stenger 22,5cm	J929047	323815																											
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
rett pute sett, stenger 19,5cm	J929022	323813																											
rett pute sett, stenger 22,5cm	J929048	323816																											
Monteringskile for Supportrygg) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kile f montering, Support-rygg</td><td>J928405</td><td>323637</td></tr> </tbody> </table> Monteringskile for sidestøtte Support rygg	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	kile f montering, Support-rygg	J928405	323637	Monteringssett for sidestøtter  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2stk l:15cm</td><td>J101001</td><td>323639</td></tr> <tr> <td>1stk l:15cm</td><td>J101080</td><td>323640</td></tr> </tbody> </table> Monteringssett for sidestøtte, lengde 15cm.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	2stk l:15cm	J101001	323639	1stk l:15cm	J101080	323640												
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
kile f montering, Support-rygg	J928405	323637																											
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
2stk l:15cm	J101001	323639																											
1stk l:15cm	J101080	323640																											
Sidestøtte lår/hofte, sett stang 17,5cm 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten l11xb6,5cm</td><td>J58053052</td><td>323806</td></tr> <tr> <td>stor 25xh7,5cm</td><td>J58054052</td><td>323810</td></tr> <tr> <td>medium l19xh7,5cm</td><td>J58055052</td><td>323808</td></tr> </tbody> </table> Sidestøtte med stang 17,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	liten l11xb6,5cm	J58053052	323806	stor 25xh7,5cm	J58054052	323810	medium l19xh7,5cm	J58055052	323808	Sidestøtte lår/hofte, sett stang 12,5cm  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten l11xb6,5cm</td><td>J58056052</td><td>323805</td></tr> <tr> <td>stor l25xh7,5cm</td><td>J58057052</td><td>323809</td></tr> <tr> <td>medium l19xh7,5cm</td><td>J58058052</td><td>323807</td></tr> </tbody> </table> Sidestøtte med stang 12,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	liten l11xb6,5cm	J58056052	323805	stor l25xh7,5cm	J58057052	323809	medium l19xh7,5cm	J58058052	323807			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
liten l11xb6,5cm	J58053052	323806																											
stor 25xh7,5cm	J58054052	323810																											
medium l19xh7,5cm	J58055052	323808																											
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																											
liten l11xb6,5cm	J58056052	323805																											
stor l25xh7,5cm	J58057052	323809																											
medium l19xh7,5cm	J58058052	323807																											



Benstøtte, fotstøtte & sidestøtte

Benstøtte m. fast vinkel for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929355	323505
ve 67° kompl	J929356	323506

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte m. fast vinkel for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929357	323509
ve 67° kompl	J929358	323510

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte, vinkelstillbar for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929359	323507
ve 68°-7° kompl	J929360	323508

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Benstøtte, vinkelstillbar for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929361	323512
ve 68°-7° kompl	J929362	323511

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Fotstøtte, medium



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b33,5xd-25cm. lang: l31-46cm	J929349	323582
medium b33,5xd-25cm. kort: l26-36cm	J929350	323581

Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte, stor



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
stor b28,3xd27,5cm, lang: l31-46cm	J929347	323580
stor b28,3xd27,5cm, kort: l26-36cm	J929348	323579

Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
f hjul m dobbel hjulbane kompl	J928731	323584
standard type kompl	J928732	323585

Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

Fotstøtte, enkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Fotstøtte hø ve inkl feste	J928740	323583

Gir støtte i sittestilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittestilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

Amputasjonsstøtte for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929351	323340
Venstre side b16xh26cm	J929352	323341

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.

Amputasjonsstøtte for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929353	323342
Venstre side b16xh26cm	J929354	323343

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.



Bremser, hjul, antitipp & tilbehør

Bremsestang 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>std. lengde 39cm</td><td>J929023</td><td>323529</td></tr><tr><td>regulerbar lengde 44-62cm</td><td>J929024</td><td>323530</td></tr><tr><td>regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep</td><td>J929025</td><td>323531</td></tr></table> Forlenger til bremsestang er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en bremse med standard lengde.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	std. lengde 39cm	J929023	323529	regulerbar lengde 44-62cm	J929024	323530	regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep	J929025	323531	Hjulsett dobbel hjulbane 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Hjulsett 4hjul</td><td>J928736</td><td>323609</td></tr></table> Doble hjul med dobbel hjulbane som triller lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hjulsett 4hjul	J928736	323609			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
std. lengde 39cm	J929023	323529																						
regulerbar lengde 44-62cm	J929024	323530																						
regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep	J929025	323531																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Hjulsett 4hjul	J928736	323609																						
Hjulsett komplett inkl bremse 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>2hjul + 2hjul m bremse</td><td>J929006</td><td>323608</td></tr><tr><td>4hjul m bremse</td><td>J929007</td><td>323610</td></tr><tr><td>4hjul m el bremse</td><td>J929008</td><td>323607</td></tr></table> 2-hjulbrems er stolens standardbrems. 4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	2hjul + 2hjul m bremse	J929006	323608	4hjul m bremse	J929007	323610	4hjul m el bremse	J929008	323607	Bremsesett for 4 hjulsbrems 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>el-bremse m mont kit</td><td>J929173</td><td>323524</td></tr><tr><td>manuell bremse komplett kit</td><td>J928757</td><td>323528</td></tr></table> Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbrems. 4-hjulsbremse sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	el-bremse m mont kit	J929173	323524	manuell bremse komplett kit	J928757	323528
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
2hjul + 2hjul m bremse	J929006	323608																						
4hjul m bremse	J929007	323610																						
4hjul m el bremse	J929008	323607																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
el-bremse m mont kit	J929173	323524																						
manuell bremse komplett kit	J928757	323528																						
Antitipphjul 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>foran 2stk kompl</td><td>J929151</td><td>323350</td></tr><tr><td>bak 2stk kompl</td><td>J929152</td><td>323349</td></tr><tr><td>foran og bak 4stk kompl</td><td>J929153</td><td>323351</td></tr></table> Velegnet for brukere som trenger stabilitet. Antitipphjul kan monteres foran og/eller bak på stolen og gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel til brukere med voldsomme bevegelser.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	foran 2stk kompl	J929151	323350	bak 2stk kompl	J929152	323349	foran og bak 4stk kompl	J929153	323351	Antitippbøyle 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Antitippbøyle kompl m. mont. kit</td><td>J929121</td><td>323347</td></tr></table> Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Antitippbøyle kompl m. mont. kit	J929121	323347			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
foran 2stk kompl	J929151	323350																						
bak 2stk kompl	J929152	323349																						
foran og bak 4stk kompl	J929153	323351																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Antitippbøyle kompl m. mont. kit	J929121	323347																						
Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>komplett m feste</td><td>J929345</td><td>323627</td></tr></table> Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	komplett m feste	J929345	323627	Bord med feste nedfellbart 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Bord b52xd40cm</td><td>J928749</td><td>323516</td></tr><tr><td>Bord b60xd49cm</td><td>J928750</td><td>323517</td></tr></table> Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bord b52xd40cm	J928749	323516	Bord b60xd49cm	J928750	323517						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
komplett m feste	J929345	323627																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Bord b52xd40cm	J928749	323516																						
Bord b60xd49cm	J928750	323517																						



Elektriske funksjoner

Se elektriske funksjoner på lift, tilt, rygg, brems, fremdrift og Utstigningshjelp her:



Elektriske innstillingsmuligheter

Seteløft 30cm 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Seteløftmotor 30cm</td><td>J929334</td><td>323644</td></tr></table> Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Seteløftmotor 30cm	J929334	323644	Utstigningshjelp med el 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>kompl m/30 cm motor</td><td>J929332</td><td>323936</td></tr><tr><td>kompl m/20 cm motor</td><td>J929344</td><td>I/A</td></tr></table> Alternativ løsning for å reise og sette sig. Utstigningshjelp gir sikkerhet og støtte når bruker reiser sig opp og setter sig i stolen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	kompl m/30 cm motor	J929332	323936	kompl m/20 cm motor	J929344	I/A			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Seteløftmotor 30cm	J929334	323644																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
kompl m/30 cm motor	J929332	323936																			
kompl m/20 cm motor	J929344	I/A																			
Soft touch alternativ styring 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>El løft soft touch hø ve front</td><td>J929054</td><td>323549</td></tr></table> Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El løft soft touch hø ve front	J929054	323549	Håndkontroll alternativ styring 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>el løft i håndkontroll m. mont kit</td><td>J929055</td><td>323550</td></tr><tr><td>Bryter 1 funksjon m jackhylse</td><td>J924047</td><td>323620</td></tr></table> Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550	Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El løft soft touch hø ve front	J929054	323549																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550																			
Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620																			
Elektrisk brems J929675 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>El brems u el boks</td><td>J929676</td><td>329599</td></tr><tr><td>El brems kompl m el boks inkl armlenpute</td><td>J929675</td><td>330110</td></tr></table> Elektrisk brems for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El brems u el boks	J929676	329599	El brems kompl m el boks inkl armlenpute	J929675	330110	Elektrisk setetilt J929669 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>El tilt u el boks</td><td>J929671</td><td>329597</td></tr><tr><td>El tilt kompl m el boks inkl armlenpute</td><td>J929669</td><td>330112</td></tr></table> Setetilt gir bruker god aktiv sittestilling, tilbakelemt gir god støtte ved hvile i stolen. For stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El tilt u el boks	J929671	329597	El tilt kompl m el boks inkl armlenpute	J929669	330112
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El brems u el boks	J929676	329599																			
El brems kompl m el boks inkl armlenpute	J929675	330110																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El tilt u el boks	J929671	329597																			
El tilt kompl m el boks inkl armlenpute	J929669	330112																			
elektrisk ryggvinkel J929672 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>El rygg u el boks</td><td>J929674</td><td>329598</td></tr><tr><td>El rygg kompl m el boks inkl armlenpute</td><td>J929672</td><td>330111</td></tr></table> Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El rygg u el boks	J929674	329598	El rygg kompl m el boks inkl armlenpute	J929672	330111	Fremdriftshjelp, elektrisk 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Fremdriftshjelp</td><td>J929339</td><td>323586</td></tr></table> Fremdriftshjelp for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Fremdriftshjelp	J929339	323586			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El rygg u el boks	J929674	329598																			
El rygg kompl m el boks inkl armlenpute	J929672	330111																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Fremdriftshjelp	J929339	323586																			
Holder for håndkontroll 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>Holder f håndkontroll kompl</td><td>J928899</td><td>323616</td></tr></table> Holder for håndkontroll, komplett for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616	El boks J929665 	<table><tr><th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr><tr><td>inkl håndkontroll for 20cm motor</td><td>J929665</td><td>329596</td></tr><tr><td>inkl håndkontroll for 30cm motor</td><td>J929666</td><td>330109</td></tr></table> Boks for elektriske funksjoner for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	inkl håndkontroll for 20cm motor	J929665	329596	inkl håndkontroll for 30cm motor	J929666	330109			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
inkl håndkontroll for 20cm motor	J929665	329596																			
inkl håndkontroll for 30cm motor	J929666	330109																			



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



Beskrivelse

Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå

Art.nr.

J773237920693

HMS art.nr.

323734

Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå

J773247920693

323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.
Farge: grå

Rygg Aktiv



Beskrivelse

Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå

Art.nr.

J08A55120693

HMS art.nr.

323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsval. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.
Farge: grå

Inkontinenstrekk



Beskrivelse

inko XXX b58xd48cm, sort

Art.nr.

J46406664

HMS art.nr.

323753

inko 4XL b72xd50cm, sort

J46477664

323754

inko Aktiv medium b47xd47cm, sort

J46T4323571

323750

inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort

J46T4324571

323752

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

Beskrivelse

Kjørehåndtak

Art.nr.

J926350

HMS art.nr.

323625



Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.

Bremsepedal

Beskrivelse

Bremsepedal hø

Art.nr.

J922982

HMS art.nr.

323522



Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.



Sete

Sete avrundet sadel

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete avrundet sadel 100/Delta b46xd35cm, sort*	J06180712692	323744

Et kort, ergonomisk buet sadelsete, som støtter og stabiliserer brukeren.



*Standard på VELA Salsa 100

Sete sykkel-sadel

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete sykkel-sadel 120/Midi b40xd35cm, sort*	J06190720692	323740

Et ergonomisk, buet sykkel-sadelsete med utskjæring i forkant, som gir brukeren støtte og god plass til lårene.



*Standard på VELA Salsa 120

Sete ridesadel

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete ride Sadel b43xd35cm, sort*	J06164520692	323741
Sete ride Sadel liten b39xd30cm, sort	J06384520692	323739

Ridesadelsetets utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling. Det mindre ridesadelsetes utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling, men i mindre grad enn et standard sadelsete. Lite ridesadelsete kan fås som alternativ



*Standard på VELA Salsa 400

Sete avrundet m. forhøyning

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
110/Kap b46xd35cm, sort	J06420712692	323743

Et kort sadelsete med en forhøyning (bue) foran på setet, slik at brukeren unngår følelsen av å gli ned fra setet når det vipper fremover.

Komfort sete
bred-kort setedybde

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
S150 b46xd32cm, sort	J06170745692	323742

Et komfortabelt sete som har en tykk og absorberende kjerne. Setet er kort og gir god plass til ben og sikrer god blodtilførsel til ben og føtter.





Trekk & rygg

Setetrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk ride Sadel sete liten b39xd30cm, sort	J46138666	323775
Setetrekk sete S150 b46xd32cm, sort	J46217666	323781
Setetrekk sete 100/Delta b46xd35cm, sort	J46218666	323783
Setetrekk sete 120/Midi b40xd35cm, sort	J46219666	323777
Setetrekk sete 110/KAP b46xd35cm, sort	J46242666	323784
Setetrekk sete side Sadel b43xd35cm, sort	J46B16666	323780

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinenstrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete ride Sadel, sort	J46416664	323779
Setetrekk inko sete S150 bredkort, sort	J46417664	323782
Setetrekk inko sete ride Sadel liten, sort	J46438664	323776
Setetrekk inko sete 100/Delta sadel, sort	J46518664	323785
Setetrekk inko sete 120/Midi sykkel, sort	J46519664	323778
Setetrekk inko sete 110/Delta forhøyet, sort	J46542664	323786

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Rygg rektangulær S150



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
b22xh29cm	J08325147692	323693

En smal ryggpute med ergonomisk bue som gir fri bevegelse i rygg, skuldre og armer. Ryggputen gir god sittekomfort ved langvarig aktivitet.

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Aktiv ekstra liten b38xh22cm*	J08A15120692	323695
Aktiv liten b38xh30cm	J08A25120692	323696

En ergonomisk buet ryggpute som gir god korsryggstøtte. Ryggputen er lav og gir brukeren fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.

*Standard

Monteringssett for rygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
mont sett, rygg	J101052	323643

Monteringssett for ryggbøyle.

Ryggtrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
S150 b22xh29cm, sort	J47132666	323710
Aktiv ekstra liten b38xh22cm, sort	J471A1666	323711
Aktiv liten b38xh30cm, sort	J471A2666	323712

Løst varetrekk til ryggpute som er hygienisk, komfortabelt og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Armlen, gassfjær, bremse & fotring

Armlen 8x26cm 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hø side h31cm*</td><td>J1024331003</td><td>323453</td></tr> <tr> <td>Ve side h31cm*</td><td>J1024431003</td><td>323455</td></tr> <tr> <td>Hø side h41cm</td><td>J1114331003</td><td>323454</td></tr> <tr> <td>Ve side h41cm</td><td>J1114431003</td><td>323456</td></tr> </tbody> </table> Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Svart m. P.U.-pute (8x26cm). *Standard	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hø side h31cm*	J1024331003	323453	Ve side h31cm*	J1024431003	323455	Hø side h41cm	J1114331003	323454	Ve side h41cm	J1114431003	323456	Armlenesett komplett m pute  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f ridesadelsete</td><td>J925801</td><td>323466</td></tr> <tr> <td>f sete Midi/120</td><td>J928599</td><td>323467</td></tr> </tbody> </table> Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Svart m. P.U.-pute (8x26cm).	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	f ridesadelsete	J925801	323466	f sete Midi/120	J928599	323467
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Hø side h31cm*	J1024331003	323453																								
Ve side h31cm*	J1024431003	323455																								
Hø side h41cm	J1114331003	323454																								
Ve side h41cm	J1114431003	323456																								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
f ridesadelsete	J925801	323466																								
f sete Midi/120	J928599	323467																								
Armlenebunn Midi/sykkelsadelsete 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Midi/ 120 sykkelsete</td><td>J927018</td><td>323470</td></tr> </tbody> </table> Armlene-bunn med oppheng for armlene for sete Midi/120 sykkelsete. Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Midi/ 120 sykkelsete	J927018	323470	Sidefeste  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sidefeste hø</td><td>J927960</td><td>323787</td></tr> <tr> <td>Sidefeste ve</td><td>J927961</td><td>323788</td></tr> </tbody> </table> Sidestykke for armlene, svart For armlene-bunn.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidefeste hø	J927960	323787	Sidefeste ve	J927961	323788									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Midi/ 120 sykkelsete	J927018	323470																								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Sidefeste hø	J927960	323787																								
Sidefeste ve	J927961	323788																								
Håndskruer for høyderegulering 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm</td><td>J927009</td><td>323621</td></tr> </tbody> </table> Håndskruer for armlene.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm	J927009	323621	Monteringssett for armlener  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>for ridesadelsete</td><td>J101093</td><td>323641</td></tr> <tr> <td>for 120/ Midi sykkelsete</td><td>J101094</td><td>323642</td></tr> </tbody> </table> Monteringssett for armlene.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	for ridesadelsete	J101093	323641	for 120/ Midi sykkelsete	J101094	323642									
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm	J927009	323621																								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
for ridesadelsete	J101093	323641																								
for 120/ Midi sykkelsete	J101094	323642																								
Gassfjær med yttørør 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15cm for sitte-høyde 45-60cm</td><td>J926894</td><td>323590</td></tr> <tr> <td>26cm for sitte-høyde 60-86cm</td><td>J926895</td><td>323592</td></tr> <tr> <td>20cm for sitte-høyde 50-70cm</td><td>J926896</td><td>323591</td></tr> </tbody> </table> Gassfjær for stoler med manuell høydejustering. Med yder-/innerrør.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	15cm for sitte-høyde 45-60cm	J926894	323590	26cm for sitte-høyde 60-86cm	J926895	323592	20cm for sitte-høyde 50-70cm	J926896	323591	Bremser  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bremsepedal hø</td><td>J925936</td><td>323523</td></tr> <tr> <td>T-grep m kule</td><td>J926877</td><td>323521</td></tr> </tbody> </table> Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken. Plasseres på baksiden av stolen hvor bremse-spaken er og betjenes ved å trykke den ned med foten. T-bremsehåndtaket forlenger bremsen slik at det er lettere å nå bremsen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsepedal hø	J925936	323523	T-grep m kule	J926877	323521			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
15cm for sitte-høyde 45-60cm	J926894	323590																								
26cm for sitte-høyde 60-86cm	J926895	323592																								
20cm for sitte-høyde 50-70cm	J926896	323591																								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Bremsepedal hø	J925936	323523																								
T-grep m kule	J926877	323521																								
Fotring oppfellbar understell u/hjul 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fotring oppellbar understell u/hjul</td><td>J927319</td><td>323572</td></tr> </tbody> </table> En oppfellbar fotring gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen, og kan felles bort når den ikke brukes. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Fotring oppellbar understell u/hjul	J927319	323572	Antitippbøyle  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kompl m mont kit</td><td>J926970</td><td>323348</td></tr> </tbody> </table> Antitippbøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	kompl m mont kit	J926970	323348												
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
Fotring oppellbar understell u/hjul	J927319	323572																								
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																								
kompl m mont kit	J926970	323348																								



Sete & trekk

Sete Junior E med/uten forhøyet kap



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete junior E2 liten b32xd35cm*	J06484940583	323721
Sete junior E3 medium b36xd43cm*	J06494940583	323725
Sete junior E4 stor b40xd47cm*	J06504940583	323728
Sete junior E2 forhøyet kap b32xd35cm	J06B34940583	323720
Sete junior E3 forhøyet kap b36xd43cm	J06B44940583	323724
Sete junior E4 forhøyet kap b40xd47cm	J06B54940583	323727

Det gir lett støtte langs låret, noe som støtter brukers sittestilling. Bakerst på setet er det en utskåret "basseng" med to utskiftbare skumplater, som gjør det enkelt å endre mykheten, støtten og sittestøtten, slik at brukeren oppnår riktig avlastning og optimal stabilitet i sittende stilling. Dette setet kan anbefales hvis brukeren kan sitte selv uten støtte, samt ved lett behov for støtte i sittestillingen. Setet med forhøyet kap anbefales hvis brukeren trenger lett hjelp til å holde bena separat eller hvis brukeren har en tendens til å gli fremover i setet.. Farge: svart ***Standard**

Sete opph. side MD



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete opph side front MD35 b35xd40cm	J06934912220	323722
Sete opph side front MD36 b36xd36cm	J06954912220	323723
Sete opph side front MD40 b40xd44cm	J06964912220	323726

MD-setet er et polstret, konturert sete med innebygde kraftige sideputer foran som styrer plasseringen av bena. Seteputen har en fordypning bakerst, slik at brukers bekken havner lenger bak på setet. Setet er egnet for bruker som trenger hjelp til å styre bekkenet og lårene, og har behov for å kunne føle en fysisk avgrensning - for eksempel brukere med muskeldystrofi eller cerebral parese. Farge: svart

Setetrekk E-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk sete E2 b32xd35cm	J46148583	323755
Setetrekk sete E3 b36xd43cm	J46149583	323761
Setetrekk sete E4 b40xd47cm	J46150583	323765

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinenstrekk E-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete E2	J46448664	323756
Setetrekk inko sete E3	J46449664	323762
Setetrekk inko sete E4	J46450664	323766

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Setetrekk MD-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk sete MD35 b35xd40cm	J46293583	323757
Setetrekk sete MD36 b36xd36cm	J46295583	323759
Setetrekk sete MD40 b40xd40cm	J46296583	323763

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinenstrekk MD-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete MD35 b35xd40cm	J46593664	323758
Setetrekk inko sete MD36 b36xd36cm	J46595664	323760
Setetrekk inko sete MD40 b40xd40cm	J46596664	323764

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg junior E



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg junior E2 liten b26xh26cm*	J08206822583	323674
Rygg junior E3 medium b28xh35cm*	J08216822583	323675

E-ryggstøtten er en godt polstret ryggstøtte som gir en lett fjæring til ryggen og behagelig støtte spesielt egnet for brukere. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og låses i vinkel, slik at det oppnås mest mulig støtte og fri bevegelse i overkroppen - for en god, aktiv sittestilling. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren selv kan sitte stabilt og ikke trenger ekstra støtte - Kroppsstøtter og sele kan imidlertid legges til senere for mer støtte. Farge: svart

***Standard for stoler med Liten & Medium sitteenhet**

Rygg Support ES



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Support ES3 medium b32xh37cm innv b20cm	J08245111220	323677
Rygg Support ES4 stor b37xh43cm innv b24cm	J08225111220	323678
Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm	J08255111220	323681

ES-ryggen er godt polstret og har innebygde sidestøtter som støtter fra hoften og opp til under armhulen. Dette gir støtte i sittestillingen og leder brukeren til midtlinjen. ES-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å oppnå mest mulig støtte i sittestillingen. Det er også mulig å legge til nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å holde seg oppreist eller blir trett i løpet av dagen. Farge: svart

Du bør måle brukers ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til det innvendige ryggstøttemålet.

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv liten b38xh30cm*	J08A25120583	323679
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm	J08A45120583	323680

Denne ryggstøtten tilbyr komfort og lett støtte, samt muligheten til å låse ryggen i en fast vinkel for bedre og mer optimal støtte til korsryggen. Stor/ekstra stor ryggstøtte har også mulighet for nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten for større juniorer som kan sitte selv uten behov for ekstra støtte eller sidestøtte. Farge: svart

***Standard for stoler med Stor sitteenhet**

Rygg ekstra støtte MD



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg ekstra støtte medium MD4 b30xh25cm	J08285113583	323676

MD4-rygg er en polstret og konturert lav rygg. Puten er buet og gir god støtte for brukeren på sidene samtidig som lumbalstøtten blir god. Ryggputen kan låses i ønsket vinkel. Ryggputen er egnet for brukere med for eksempel muskeldystrofi eller ryggkifose. Farge: svart

Ryggbøyle



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
152cm med 5,4cm vinkel m mont kit	J929259	323700
152cm med 10,3cm vinkel m mont kit	J929260	323699
142cm med 5,4cm vinkel m mont kit	J929278	323698

Ryggbøyle med regulerbar vinkel til ryggputer med låsbar vinkeljustering. Med monteringskit.

Nakkestøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
liten b17,5xh9cm	J410301391	323653

Nakkestøtte i svart skinn.



Armlen

Armlen 9x25cm 	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026835003</td><td>323360</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116835003</td><td>323363</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026935003</td><td>323366</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116935003</td><td>323369</td></tr> </table> Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026835003	323360	Venstre h31cm	J1116835003	323363	Høyre h41cm	J1026935003	323366	Venstre h41cm	J1116935003	323369	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm*</td><td>J1026834003</td><td>323361</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm*</td><td>J1116834003</td><td>323364</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026934003</td><td>323367</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116934003</td><td>323370</td></tr> </table> Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen. *Standard	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm*	J1026834003	323361	Venstre h31cm*	J1116834003	323364	Høyre h41cm	J1026934003	323367	Venstre h41cm	J1116934003	323370
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026835003	323360																														
Venstre h31cm	J1116835003	323363																														
Høyre h41cm	J1026935003	323366																														
Venstre h41cm	J1116935003	323369																														
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm*	J1026834003	323361																														
Venstre h31cm*	J1116834003	323364																														
Høyre h41cm	J1026934003	323367																														
Venstre h41cm	J1116934003	323370																														
Armlen 9x30cm 	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026804003</td><td>323372</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116804003</td><td>323375</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026904003</td><td>323378</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116904003</td><td>323381</td></tr> </table> Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026804003	323372	Venstre h31cm	J1116804003	323375	Høyre h41cm	J1026904003	323378	Venstre h41cm	J1116904003	323381	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026805003</td><td>323374</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116805003</td><td>323377</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026905003</td><td>323380</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116905003</td><td>323383</td></tr> </table> Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026805003	323374	Venstre h31cm	J1116805003	323377	Høyre h41cm	J1026905003	323380	Venstre h41cm	J1116905003	323383
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026804003	323372																														
Venstre h31cm	J1116804003	323375																														
Høyre h41cm	J1026904003	323378																														
Venstre h41cm	J1116904003	323381																														
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026805003	323374																														
Venstre h31cm	J1116805003	323377																														
Høyre h41cm	J1026905003	323380																														
Venstre h41cm	J1116905003	323383																														
Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch 	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026859003</td><td>323362</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116859003</td><td>323365</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026959003</td><td>323368</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116959003</td><td>323371</td></tr> </table> For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026859003	323362	Venstre h31cm	J1116859003	323365	Høyre h41cm	J1026959003	323368	Venstre h41cm	J1116959003	323371	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026860003</td><td>323373</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116860003</td><td>323376</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026960003</td><td>323379</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116960003</td><td>323382</td></tr> </table> For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026860003	323373	Venstre h31cm	J1116860003	323376	Høyre h41cm	J1026960003	323379	Venstre h41cm	J1116960003	323382
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026859003	323362																														
Venstre h31cm	J1116859003	323365																														
Høyre h41cm	J1026959003	323368																														
Venstre h41cm	J1116959003	323371																														
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026860003	323373																														
Venstre h31cm	J1116860003	323376																														
Høyre h41cm	J1026960003	323379																														
Venstre h41cm	J1116960003	323382																														
Armlen 6x21cm 	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026809003</td><td>323352</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116809003</td><td>323353</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026909003</td><td>323354</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116909003</td><td>323355</td></tr> </table> Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026809003	323352	Venstre h31cm	J1116809003	323353	Høyre h41cm	J1026909003	323354	Venstre h41cm	J1116909003	323355	<table> <tr> <th>Beskrivelse</th><th>Art.nr.</th><th>HMS art.nr.</th></tr> <tr> <td>Høyre h31cm</td><td>J1026831003</td><td>323356</td></tr> <tr> <td>Venstre h31cm</td><td>J1116831003</td><td>323357</td></tr> <tr> <td>Høyre h41cm</td><td>J1026931003</td><td>323358</td></tr> <tr> <td>Venstre h41cm</td><td>J1116931003</td><td>323359</td></tr> </table> Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Høyre h31cm	J1026831003	323356	Venstre h31cm	J1116831003	323357	Høyre h41cm	J1026931003	323358	Venstre h41cm	J1116931003	323359
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026809003	323352																														
Venstre h31cm	J1116809003	323353																														
Høyre h41cm	J1026909003	323354																														
Venstre h41cm	J1116909003	323355																														
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																														
Høyre h31cm	J1026831003	323356																														
Venstre h31cm	J1116831003	323357																														
Høyre h41cm	J1026931003	323358																														
Venstre h41cm	J1116931003	323359																														



Sele & fotstøtte

Hoftesele Y-sele med trykklås 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str liten kompl	J929262	323491
	str medium kompl	J929264	323492
	str stor kompl	J929266	323493
En 4-punkts hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.			
Hoftesele Y-sele med klemlås 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str liten kompl	J929263	323481
	str medium kompl	J929265	323482
	str stor kompl	J929267	323483
En 4-punkts hoftesele med klemlås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.			
Hoftesele Pelvi 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str xtra liten kompl	J929268	323494
	str liten kompl	J929269	323486
	str medium kompl	J929270	323488
	str stor kompl	J929271	323490
Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at gli frem i setet. Med monteringskit.			
Brystsele H-sele Sternum 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str liten kompl	J929272	323485
	str medium kompl	J929273	323487
	str stor kompl	J929274	323489
Brystsele Sternum komplett med monteringskit.			
Hoftesele 115cm med trykklås 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	lengde 115cm trykklås kompl	J929331	323484
Hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Lengde 115cm, komplett			
Beskyttelseskappe f. Y-sele 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633
Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet åpning av selen.			
Fotstøtte, medium 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Fotstøtte plate medium stang l26-41cm 10°	J928209	323577
	Fotstøtte plate medium stang l21-31cm 10°	J928210	323574
Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plast-platte er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.			
Fotstøtte, stor 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Fotstøtte plate stor stang l26-41cm 10°	J928098	323578
	Fotstøtte plate stor stang l21-31cm 10°	J928099	323575
Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplatte er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.			
Fotstøtte 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	standard type kompl	J928732	323585
Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.			



Støtte, kjørebøyle & bord

Sidestøtte buet pute, sett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.
liten sett, stenger 19,5cm	J929286	323799
stor sett, stenger 19,5cm	J929287	323800
liten sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929291	323801
stor sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929292	323804

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Kan reguleres i h/d/b, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.

Sidestøtte rett pute, sett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
rett pute sett, stenger 19,5cm	J929288	323803
rett pute sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929293	323802

Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.

Sidestøtte, sett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
liten l11xb6,5cm sett	J58018052	323793
medium l19xb7,5cm sett	J58019052	323795
stor l25xb7,5cm sett	J58020052	323797

Sidestøtte i svart skai. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.

Sidestøtte lår/hofte, sett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
liten l11xb6,5cm	J58042052	323794
medium l19xb7,5cm	J58043052	323796
stor 25xb7,5cm	J58044052	323798

Sidestøtte med stang 12,5x3cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.

Stang for sidestøtte for Support-rygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.
buet, b2cmx19,5cm	J928372	323889
buet b2cmx22,5cm	J928373	323890
buet b4,5x22,5cm	J928374	323891
rett l20,8cm	J928597	323892

Stang for sidestøtte for sidestøtte Support-rygg

Monteringskile for Support-rygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
kile f montering, Support-rygg	J928405	323637

Monteringskile for sidestøtte Support-rygg

Abduksjonskloss



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
d11xb8xh6cm	J58050052	323336
d11xb9xh9cm	J58051052	323337
d14xb12xh6cm	J58052052	323335

Abduksjonskloss i svart skai. Monteres under sete på setets front og hjelper bruker i sittestillingen.

Ankelbelte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
liten, kompl	J929275	323344
medium, kompl	J929276	323345
stor, kompl	J929277	323346

Hjelper bruker med å sitte med føttene på fotplaten og gir støtte i sittestillingen.

Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Kjørebøyle regulerbar kompl	J928257	323626

Kjørebøylen gir hjelpere god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.

Bord med feste nedfellbart



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Bord b52xd40cm kompl m mont kit	J929279	323515

Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.



Hjul, brems & elektrisk styring

Hjulsett dobbel hjulbane	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsesett for 4 hjulsbrems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Hjulsett 4hjul Doble hjul med dobbel hjulbane som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.	J928736	323609		el-brems m mont kit manuell brems komplett kit	J929173 J928757	323524 323528
Hjulsett komplett inkl brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Seteløft 30cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	4hjul m el brems 4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.	J929008	323607		Seteløftmotor 30cm Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.	J929334	323644
Elektrisk brems for armlen	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Elektrisk brems for håndkontroll	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	kompl m el boks inkl armlenpute Elektrisk brems sett betjening for stoler med elektrisk høydeinnstilling i armlen.	J929677	330113	J929679 	kompl m el boks inkl håndkontr f 20cm motor kompl m el boks inkl håndkontr f 30cm motor	J929679 J929680	330114 330115
Soft touch alternativ styring	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Håndkontroll alternativ styring	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	El løft soft touch hø ve front Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.	J929054	323549		el løft i håndkontroll m. mont kit Håndkontroll for elektrisk lift.	J929055	323550



Kvalifisert rådgivning og rask service

RÅDGIVNING

En del av kjernekompetansen hos VELA er rådgivning og bistand med utprøving hos brukeren. Vi bistår terapeuten i å finne stolen som dekker den enkelte brukers behov. Du sikrer at brukeren hjelpes med riktig produkt i forhold til funksjonsnedsettelse.

Vi setter brukeren i sentrum og rådgir for å finne den beste løsningen.

Vi er selvsagt alltid klare til å gi råd og veiledning via telefon, e-post og chat.

RASK RESPONSTID

Service er en av våre andre kjernekompetanser i VELA. Vi har egne serviceteknikere og samarbeidspartnere over hele landet. Vi har kort responstid på service, reparasjoner og ombygging, og arbeidet kan ofte utføres hos brukeren slik at bruker ikke må være uten stolen sin.

